



DragLab

Laboratuvar

Su Banyosu

DW 06

DW 10

DW 15

DW 25

DW 35

DW 50

Bağla & Kullan



DragLab

Su Banyosu DW 06

DragLab su banyosu, biyoteknoloji, kimya ve çevre bilimleri de dahil olmak üzere çeşitli laboratuvar uygulamaları için ideal bir çözümdür. 5°C ila 100°C aralığında hassas PID dijital sıcaklık kontrolü sunar. DragLab su banyosu DW 06 modeli, 6 litrelik kullanılabilir tank hacmine sahiptir ve entegre tahliye musluğu ile ayarlanabilir ayaklar, ergonomik tutma sapları sayesinde kolay taşınabilir ve güvenli bir kullanım sağlar.



DragLab Su Banyosu: Laboratuvar Uygulamaları İçin Hassasiyet, Dayanıklılık ve Verimlilik

DragLab su banyosu, genel amaçlı uygulamalar için tutarlı ve kontrollü sıcaklık koşulları sağlayan bir laboratuvar cihazıdır. Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç tank ile donatılmış olup, ısıtıcı elemanın tank içinde konumlandırılması hızlı ısınma ve hassas ısıtma sağlar. Ayrıca, elektrostatik toz boyalı çelik dış yüzey dayanıklılık sunar. Entegre tahliye musluğu, hızlı ve temiz boşaltım imkânı verirken, ergonomik yan tutma sapları taşımayı kolaylaştırır. Ayarlanabilir ayaklar cihazın stabilitesini artırır ve dahili dolaşım pompası performans ile sıcaklık homojenliğini iyileştirir. Cihaz, sıcaklık ayarı ve görüntüleme için dijital ekran, zamanlayıcı ve banyo durumu göstergesi içerir. 304 paslanmaz çelik kapak ısı kaybını azaltır ve homojen sıcaklık sağlar, delikli taban plakası ise ısıtıcı elemanlarla doğrudan teması önler. Son olarak, 6L ila 50L arasındaki hacim seçenekleri, çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılar.

Uygulama:


- Biyoteknoloji Laboratuvarları
- Akademik ve Araştırma Kurumları
- Sağlık ve Klinik Laboratuvarlar
- Gıda ve İçecek Üretimi
- Çevresel Test Laboratuvarları
- Kozmetik ve Cilt Bakım Ürünleri Üretimi
- İlaç Endüstrisi
- Kimya Laboratuvarları ve Numune Hazırlama

Kalite ve Uzmanlık



DragLab, kalite ve mükemmeliyete olan sarsılmaz bağlılığımızı yansıtan ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir. Üretim süreçlerimizi sürekli olarak optimize ederek her adımın verimli ve etkili olmasını sağlıyoruz. Sürekli gelişim ve yenilik yoluyla, sektör standartlarını karşılamayı ve aşmayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve memnuniyetini önceliklendirir ve bu sayede titiz kalite güvence protokollerini sürdürmemizi sağlar. Bu adanmışlık, DragLab tarafından üretilen laboratuvar ekipmanlarının sürekli olarak en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılamasını garanti eder.



DragLab Laboratuvar Cihazları, müşterilerimizin en titiz gereksinimlerini karşılamak amacıyla yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak özenle tasarlanmakta ve üretilmektedir. Mükemmeliyet ve yeniliğe olan bağlılığımız, günlük kullanım ve sürekli teknolojik gelişmeler ışığında sürekli gelişim ve iyileştirmeyi yönlendirmektedir. "Kalite ve Uzmanlık" yalnızca etkileyici ürün tasarımları oluşturmak anlamına gelmez; aynı zamanda şirketimizin temel hedefi olarak yüksek hazırlık düzeyi ve müşteri odaklı hizmeti önceliklendirme politikasını yansıtır. Bu adanmışlık, mevcut Avrupa standartlarına uygun olan ve CE işaretine sahip tüm DragLab ürünlerini kapsamaktadır.

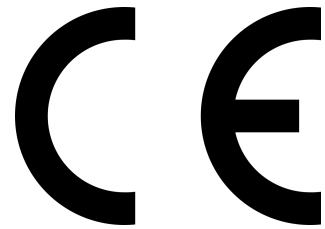

Su Banyosu DW 06

DragLab su banyosu, biyoteknoloji, kimya ve çevre bilimleri gibi çeşitli laboratuvar uygulamaları için ideal bir çözümdür. Cihaz, 5°C ile 100°C arasında ortam sıcaklığına sahip hassas PID dijital sıcaklık kontrolü sunar. DragLab su banyosu DW 06 modeli, 6 litrelik kullanışlı bir tank hacmine sahiptir ve entegre bir tahliye musluğu ile ayarlanabilir ayaklar, ergonomik tutma kolları sayesinde kolay taşınabilirlik ve güvenli kullanım sağlar.

Boyutlar:

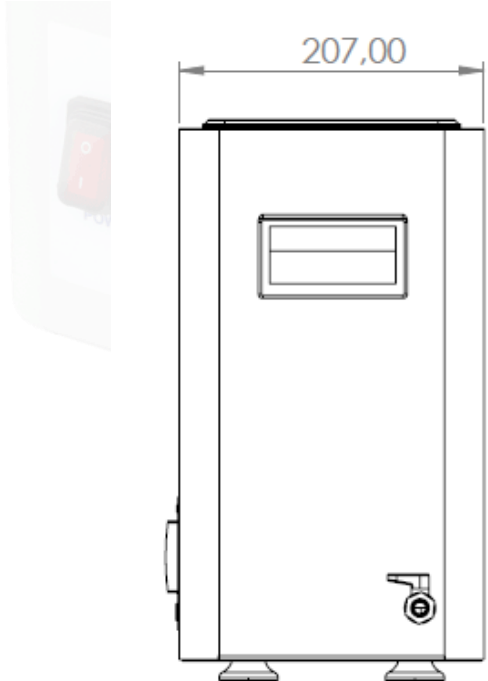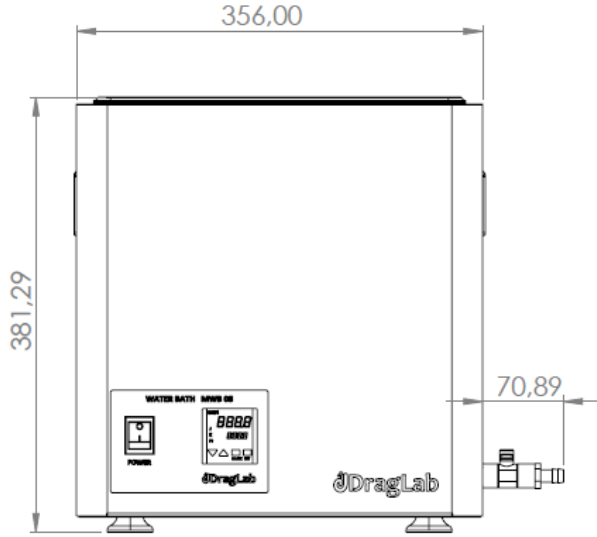

Özellikler:

Kapasite :

6 litrelik tank kapasitesi. .

Görüntüleme :

Sıcaklık ayarını ve görüntülemesini sağlayan dijital ekran, zamanlayıcı fonksiyonu ile .

Kontrol :

Sezgisel kontroller ve kullanıcı dostu arayüz ile kolay kullanım .

Koruma :

Ana şalter, olası ıslak koşullarda güvenli kullanım için su sıçramalarına karşı korunmuştur. Entegre güvenlik özelliği, kuru çalışmayı önler .

Boşaltma Sistemi :

Tankın kolay ve pratik bir şekilde boşaltılmasını sağlayan entegre tahliye musluğu .

Bakım :

Kolay erişilebilen tank ile zahmetsiz temizlik ve bakım imkanı .

Malzeme :

Tank: Paslanmaz çelik AISI 304.
Isıtma elemanı: Paslanmaz çelik.
Gövde: Galvanizli çelik, elektrostatik toz boya kaplı .

Taşıma :

Kolay taşımayı sağlayan ergonomik yan tutamaklar.
Geliştirilmiş stabilite için ayarlanabilir ayaklar .

Enerji Verimliliği :

Verimli çalışma ve düşük enerji tüketimi için enerji tasarruf özellikleri .

Su Banyosu DW 06

Özellikler:

Sıcaklık

Ayar sıcaklık aralığı	+5.00 °C ile 100.00 °C
Sıcaklık hassasiyeti	0.1 °C
Sıcaklık birimi	Santigrat veya Fahrenheit seçimi kolaydır.
Sıcaklık sensörü	2 telli devrede 1 Pt100 sensör, DIN sınıf A.

Kontrol teknolojisi

Kontrolör	PID mikroişlemcili dijital kontrolör.
Görüntüleme	4 haneli 7 segment dijital ekran.
Kalibrasyon	Tek nokta kalibrasyon.
Zamanlayıcı	1 dakikadan 9999 dakikaya kadar dijital zamanlayıcı, gecikme fonksiyonlu

Standart donanım

Isıtma elemanı	Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma elemanı (malzeme no.: EN 1.4301).
Drenaj sistemi	Entegre tahliye musluğu ile kolay boşaltım.
Dış malzeme	Galvanizli çelikten, elektrostatik toz boyalı muhafaza.
Sirkülasyon	Performansı artırmak ve sıcaklık homojenliğini sağlamak için dahili sirkülasyon pompası.
Ana şalter	LED ışıklı ana şalter, su sıçramalarına karşı korunmuş.
Kapak	Paslanmaz çelik kapak, ısı kaybını azaltır ve uniform sıcaklık sağlar.

Güvenlik

Alarm	Bağımsız sıcaklık güvenlik cihazında ayarlanabilir limit.
Otomatik tanılama sistemi	Arıza göstergeli mikroişlemcili PID sıcaklık kontrolörü, entegre otomatik
Sınıf	AB direktifi MDD 93/42/EEC'ye uygun Sınıf I.
Koruma Sınıfı	EN 60529'a göre IP20.
Standartlar	EN 61010-1 ve EN 61010-2-010 (AB direktifi 2014/35/EU'ya uygun), EN 61326:2021 (AB direktifi 2014/30/EU'ya uygun).

Su Banyosu DW 06

Teknik Özel-

İç Kısım

İç malzeme	Paslanmaz çelik AISI 304
İç boyutlar	300 G x 150 D x 200 Y (mm)
Tabaka	Delikli taban plakası dahildir
Hacim	6 litre
Minimum sıvı seviyesi	40 mm
Maksimum sıvı seviyesi	165 mm

Elektrik Verileri

Voltaj	230 V, 50/60 Hz
Watt	1000 w

Kargo Bilgileri

Gümrük tarife numarası	8419 8998
Paketleme boyutu	430 X 450 X 240 (mm)
Net ağırlık	8 Kg
Brüt ağırlık (koli)	10 Kg

Sipariş Bilgileri

Açıklama	Model	Makale Numarası
Su Banyosu Hacmi 6 L, 220V/50-60 Hz	DW 06	2006.000