



DragLab

Laboratuvar

Su Banyosu

DW 06

DW 10

DW 15

DW 25

DW 35

DW 50

Bağla & Kullan



DragLab

Su Banyosu DW 35

DragLab su banyosu, biyoteknoloji, kimya ve çevre bilimleri dahil olmak üzere çeşitli laboratuvar uygulamaları için ideal bir çözümdür. 5°C ile 100°C arasında hassas PID dijital sıcaklık kontrolü sunar. DragLab su banyosu DW 35 modeli, 35 litrelik kullanışlı tank hacmine sahip olup, entegre tahliye musluğu ve ayarlanabilir ayaklar ile ergonomik tutma sapı sayesinde kullanımı kolay ve güvenlidir.



DragLab Su Banyosu: Laboratuvar Uygulamaları İçin Hassasiyet, Dayanıklılık ve Verimlilik

DragLab su banyosu, genel amaçlı uygulamalar için tutarlı ve kontrollü sıcaklık koşulları sağlayan bir laboratuvar cihazıdır. Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç tanka sahiptir ve önemli olarak, paslanmaz çelik ısıtıcı eleman iç kısımda yer alarak hızlı ısınma ve hassas ısıtma sağlar. Ayrıca, elektrostatik toz boya kaplı çelik dış gövde dayanıklılığı garanti eder. Entegre tahliye musluğu hızlı ve temiz boşaltım imkanı sunarken, ergonomik yan tutma sapları kolay taşımayı sağlar. Ayarlanabilir ayaklar stabiliteyi artırır. Performansı ve sıcaklık homojenliğini artırmak için sirkülasyon pompası entegre edilmiştir. Cihaz, sıcaklıkların ayarlanması ve görüntülenmesi, zamanlayıcı ve banyo durumunu takip etmek için dijital ekrana sahiptir. 304 paslanmaz çelik kapak ısı kaybını azaltır ve uniform sıcaklık sağlar. Delikli alt plaka, ısıtıcı elemanlarla doğrudan teması önler. Ayrıca, 6L'den 50L'ye kadar değişen hacim seçenekleri çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Uygulama:


- Biyoteknoloji laboratuvarları.
- Akademik ve Araştırma Kurumları.
- Sağlık ve Klinik Laboratuvarlar.
- Gıda ve içecek üretimi.
- Çevresel Test Laboratuvarları.
- Kozmetik ve cilt bakım ürünleri üretimi.
- İlaç Endüstrisi.
- Kimya laboratuvarları ve numune hazırlığı.

Kalite ve Uzmanlık



DragLab, kalite ve mükemmeliyete olan sarsılmaz bağlılığımızı yansıtan ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir. Üretim süreçlerimizi sürekli olarak optimize ederek her adımın verimli ve etkili olmasını sağlamaktayız. Sürekli gelişim ve yenilik ile sektör standartlarını karşılamayı ve aşmayı hedeflemekteyiz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve memnuniyetini önceliklendirir ve bizi titiz kalite güvence protokollerini sürdürmeye yönlendirir. Bu özveri, DragLab tarafından üretilen laboratuvar ekipmanlarının sürekli olarak en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılamasını garanti eder.

DragLab Laboratuvar Cihazları, müşterilerimizin en titiz gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak özenle tasarlanmakta ve üretilmektedir. Mükemmeliyet ve yeniliğe olan bağlılığımız, günlük kullanım deneyimleri ve sürekli teknolojik gelişmeler ışığında sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi sağlamaktadır. “Kalite ve Uzmanlık” yalnızca etkileyici ürün tasarımları yaratmak anlamına gelmez; aynı zamanda yüksek hazırlık düzeyini ve müşteri odaklı hizmeti temel hedef olarak benimseyen şirket politikamızı yansıtır. Bu özveri, tüm DragLab ürünlerinde geçerli olup, ürünler güncel Avrupa standartlarına uygundur ve CE işareti taşımaktadır.

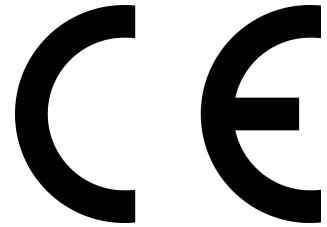

Su Banyosu DW 35

DragLab su banyosu, biyoteknoloji, kimya ve çevre bilimleri dahil olmak üzere çeşitli laboratuvar uygulamaları için ideal bir çözümdür. 5°C ile 100°C arasında hassas PID dijital sıcaklık kontrolü sunar. DragLab su banyosu DW 35 modeli, 35 litrelik kullanışlı tank hacmine sahip olup, entegre tahliye musluğu ve ayarlanabilir ayaklar ile ergonomik tutma sapı sayesinde kullanımı kolay ve güvenlidir.

Boyutlar:



Özellikler:

Kapasite :

35 litre tank kapasitesi .

Ekran :

Sıcaklık ayarı ve görüntüleme için dijital ekran, zamanlayıcı fonksiyonu ile.

Kontrol :

Sezgisel kontroller ve kullanıcı dostu arayüz ile kolay kullanım .

Koruma :

Ana şalter, ıslak koşullarda güvenli kullanım için sıçrama suyuna karşı korunmuştur.
Entegre güvenlik özelliği, susuz çalışma durumunu engeller .

Drenaj Sistemi :

Kolay ve pratik boşaltma için entegre tahliye musluğu

Bakım :

Kolay erişilebilir tank yapısı sayesinde zahmetsiz temizlik ve bakım .

Malzeme :


Tank: Paslanmaz çelik AISI 304.
Isıtma elemanı: Paslanmaz çelik.
Gövde: Galvanizli çelik, elektrostatik toz boyalı .

Kullanım Kolaylığı :

Ergonomik yan tutma kolları ile kolay taşıma.
Geliştirilmiş stabilite için ayarlanabilir ayaklar .

Enerji Verimliliği :

Verimli çalışma ve düşük enerji tüketimi için enerji tasarruflu özellikler .

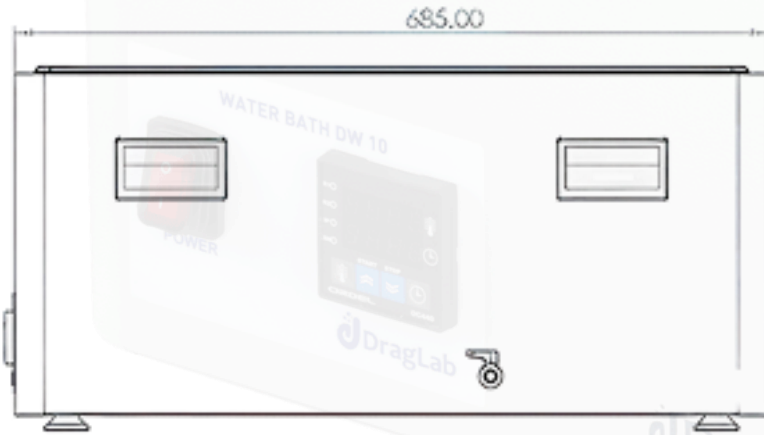

Su Banyosu DW 35

Teknik Özellikler:

Sıcaklık

Ayarlanabilir sıcaklık aralığı	+5.00 °C ile 100.00 °C
Sıcaklık ayar hassasiyeti	0.1 °C
Sıcaklık birimi	Santigrat veya Fahrenheit olarak kolay seçim
Sıcaklık sensörü	1 adet Pt100 sensör, DIN Class A, 2 telli devre

Kontrol Teknolojisi

Kontrolör	PID mikroişlemci tabanlı dijital kontrolör
Ekran	4 haneli, 7 segment dijital ekran
Kalibrasyon	Tek nokta kalibrasyon
Zamanlayıcı	1 dakikadan 9999 dakikaya kadar dijital zamanlayıcı, gecikme fonksiyonlu

Standart Donanım

Isıtma elemanı	Paslanmaz çelik (malzeme no.: EN 1.4301)
Drenaj sistemi	Entegre tahliye musluğu – kolay boşaltma
Dış malzeme	Galvanizli çelik gövde, elektrostatik toz boyalı
Sirkülasyon	Performansı artırmak ve sıcaklık homojenliği sağlamak için dahili sirkülasyon pompası
Ana şalter	LED ışıklı, su sıçramasına karşı korumalı
Kapak	Paslanmaz çelik kapak, ısı kaybını azaltır ve homojen sıcaklık sağlar

Güvenlik

Alarm	Bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı ile ayarlanabilir limit
Otomatik tanılama sistemi	Hata göstergeli entegre otomatik tanılama özellikli PID mikroişlemci sıcaklık kontrolörü
Sınıf	AB direktifi MDD 93/42/EEC'e göre Sınıf I
Koruma sınıfı	EN 60529'a göre IP20
Standartlar	EN 61010-1 ve EN 61010-2-010, AB direktifi 2014/35/EU'ya uygun EN 61326:2021, AB direktifi 2014/30/EU'ya uygun

Su Banyosu DW 35

Teknik Özellikler:

İç Kısım

İç malzeme	AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş iç tank
İç ölçüler	625 G x 505 D x 150 Y (mm)
Plaka	Delikli alt plaka dahildir
Hacim	35 litre
Minimum sıvı seviyesi	40 mm
Maksimum sıvı seviyesi	115 mm

Elektriksel Veriler

Voltaj	230 V, 50/60 Hz
Watt	1000 w

Sevkiyat Bilgileri

Gümrük tarife numarası	8419 8998
Paketleme ölçüleri	420 X 650 X 690 (mm)
Net ağırlık	30 Kg
Brüt ağırlık (kutu)	33 Kg

Sipariş Bilgileri:

Açıklama	Model	Ürün Numarası
35 Litre Su Banyosu, 220V/50-60 Hz	DW 35	2035.000