

FÛT DASRI

50 L – JAUNE - POLYPROPYLENE

676556

AVANTAGES

CONFORT

- Poignées larges offrant une excellente prise en mains et une plus grande facilité pour empiler les fûts et optimiser le stockage.
- Volume d'encombrement réduit grâce à un design alliant compacité et esthétisme.

SECURITE

- Tous nos fûts de récupération des déchets à risque infectieux possèdent un niveau d'homologation élevé, Européen et Français, et sont conformes à la norme NF X 30-511
- Le système de fermeture par crochets, répartis sur le périmètre du couvercle, garantit une sécurité totale de l'utilisateur et un contrôle visuel de bonne fermeture de celui-ci. **1**
- Quatre ergots de retenue permettent aux utilisateurs de poser le couvercle sur les flancs du fût et garantissent ainsi sécurité et hygiène avant la fermeture définitive du collecteur. **2**
- Fond de cuve optimisé offrant une parfaite stabilité lors des transports.

PERFORMANCES ET ECONOMIE

- Pour toujours plus de performance, l'accent a été mis sur l'optimisation de la reprise de charges et du poids de nos collecteurs : jusque 25 kg pour un fût pesant seulement 1,1 kg.

CARACTERISTIQUES



Composition support : polypropylène
Dimensions : 334 x 404 x 517 mm
Capacité nominale : 50 L
Capacité utile : 42,5 L
Poids : 1125 g
Couvercle vendu séparément.

DOMAINES ET APPLICATIONS

La gamme DASRI est destinée à la collecte des déchets à risques infectieux liés à l'administration des soins. Utilisable pour tous types de déchets piquants, coupants, tranchants.



 Réf. 676556 – Jaune - l'unité

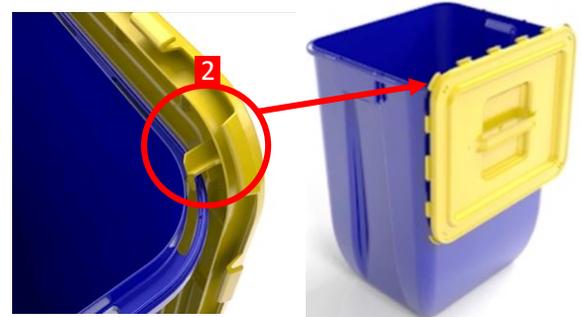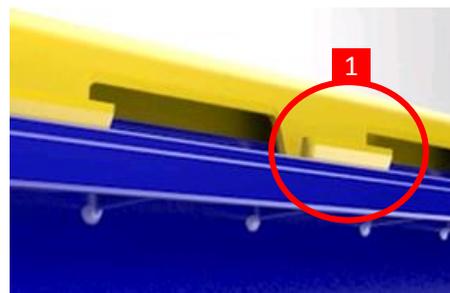

CERTIFICATIONS ET NORMALISATION



NF X 30-511 / ISO 23907



CONFORMITE
ADR

N° ONU : 1H2/Y25/S/--/NL/TCPI-WIVA-140536

FÛT DASRI

50 L – JAUNE - POLYPROPYLÈNE

676556

MODE D'EMPLOI



1
Appuyer doucement sur deux coins opposés.



2
Appuyer doucement sur les deux autres coins.



3
Appuyer ensuite sur les crochets se trouvant sur la longueur du fût, en commençant par ceux qui sont le plus proches de vous.



4
Pour terminer, appuyer sur les crochets se trouvant sur la largeur du fût. Contrôler visuellement que tous les crochets soient correctement fermés. Pour cela il suffit de les voir ressortis de la lèvre extérieure.

PRODUITS DE LA GAMME DASRI

| | DECHETS PCT * | DECHETS MOUS | DECHETS LIQUIDES | PIECES ANATOMIQUES | LITRAGES |
|---|---------------|--------------|------------------|--------------------|--|
| Collecteurs DASRI  | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | de 0,6 L (mini-collecteur) à 60 L (Fûts) |
| Sacs et cartons DASRI  | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | de 15 L à 110 L |
| Jericanes DASRI  | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | de 10 L à 20 L |
| Caisses anatomiques  | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | de 1,5 kg à 30 kg (charge utile) |

* Piquants, Coupants, Tranchants