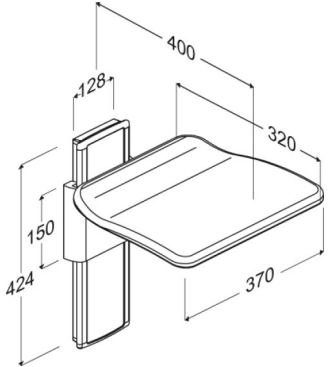




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart R5520112112
<b>Farve</b>	VVS:777531212 NRF:7501004 EAN:5708590321349 HMI: 130158 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Sædet er opklappeligt.</p> <p>Ekskl. monteringsbolte. Klappesædet bør ikke anvendes i bruseområdet.</p> <p>PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Aluminium, hærdeplast og kunststof. Ekskl. monteringsbolte.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	240 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal brugervægt: 265 kg. Når sædet belastes med 265 kg, belastes hver monteringskrue med 23 kg.  <i>PLUS klapsæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
<b>Materialer</b>	Aluminium, hærdeplast og kunststof.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

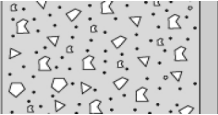
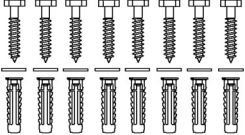

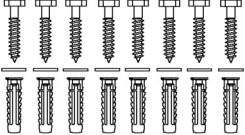
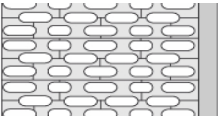
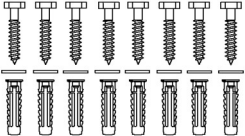
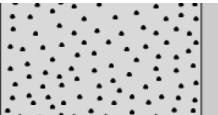
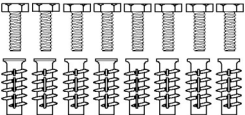
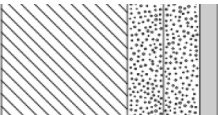
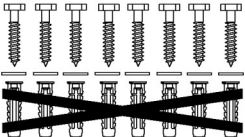


<b>Produkt</b>	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R5520112112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



<b>Produkt</b>	PLUS klapsæde, manuelt højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R5520112112

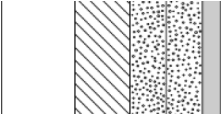
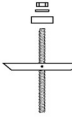

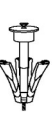
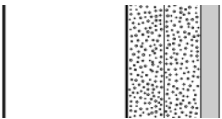
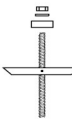


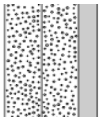
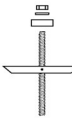


## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8660 - Monteringssæt, 8 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	





# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart R5520112112	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®