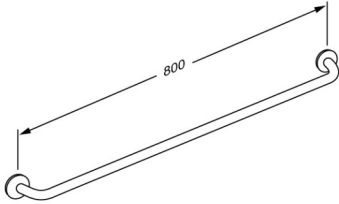




Produkt Varenummer	PLUS håndgreb 800 mm RT103112
Farve	VVS:777565412 NRF:6311211 RSK:8980551 EAN:5708590318684 HMI: 19084 NBS:N13:436 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 <p>PLUS håndgreb er produkter af høj kvalitet, der kan kombineres på utallige måder og fuldende indretningen af det funktionelle og fleksible badeværelse. En stabil håndgrebsløsning med et væld af kombinationsmuligheder, som kan lette vejen til øget selvhjulpethed.</p> <p>PLUS håndgreb, diameter 33 mm, længde 800 mm, til fastmontering. Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb, gør det nemt at få fat i grebet. Inkl vægroset, som skjuler monteringskruerne. Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof. Ekskl. monteringskruer til væg.</p>
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 235 kg. Når håndgrebet belastes med 235 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 56 kg. <i>Håndgreb er testet med sikkerhedsfaktor 1,5 i henhold til kravene i DS/ISO 17966:2016.</i>
Materialer Ergonomi	Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cycloy-plast Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt. Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



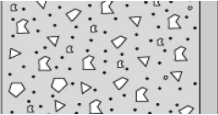
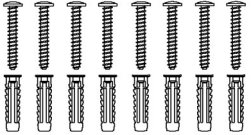

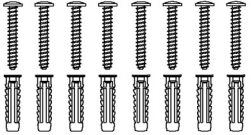
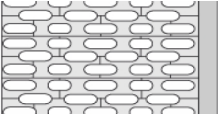
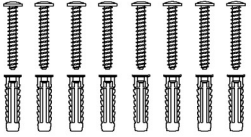
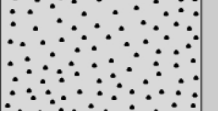
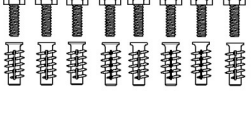
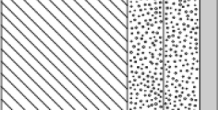
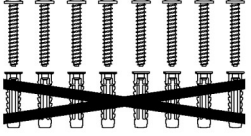
Produkt	PLUS håndgreb 800 mm
Varenummer	RT103112
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
Overensstemmelses- erklæring	<p>Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.</p>





Produkt	PLUS håndgreb 800 mm
Varenummer	RT103112

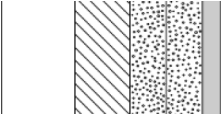
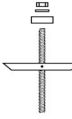

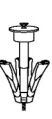
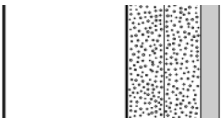
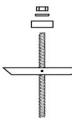


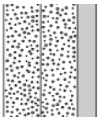

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8666 - Monteringssæt, 8 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	





PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS håndgreb 800 mm RT103112	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®