

Manuale di Istruzioni

Istruzioni Passo per Passo per Creare un Piano di Trattamento




DR ANNIE™ Insights


it-IT

Version: 072025V3

Disponibilità della Lingua

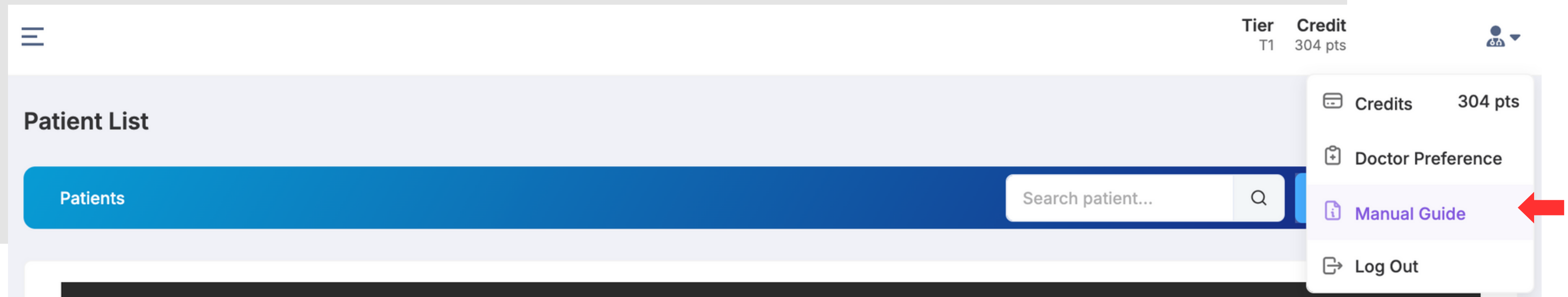

- Questo documento è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese (Brasile) e spagnolo (Messico).
- Per accedere al manuale, fai clic sull'icona nell'angolo in alto a destra e scorri verso il basso fino a "Manual Guide".
- Seleziona la versione che meglio corrisponde alla tua lingua preferita.

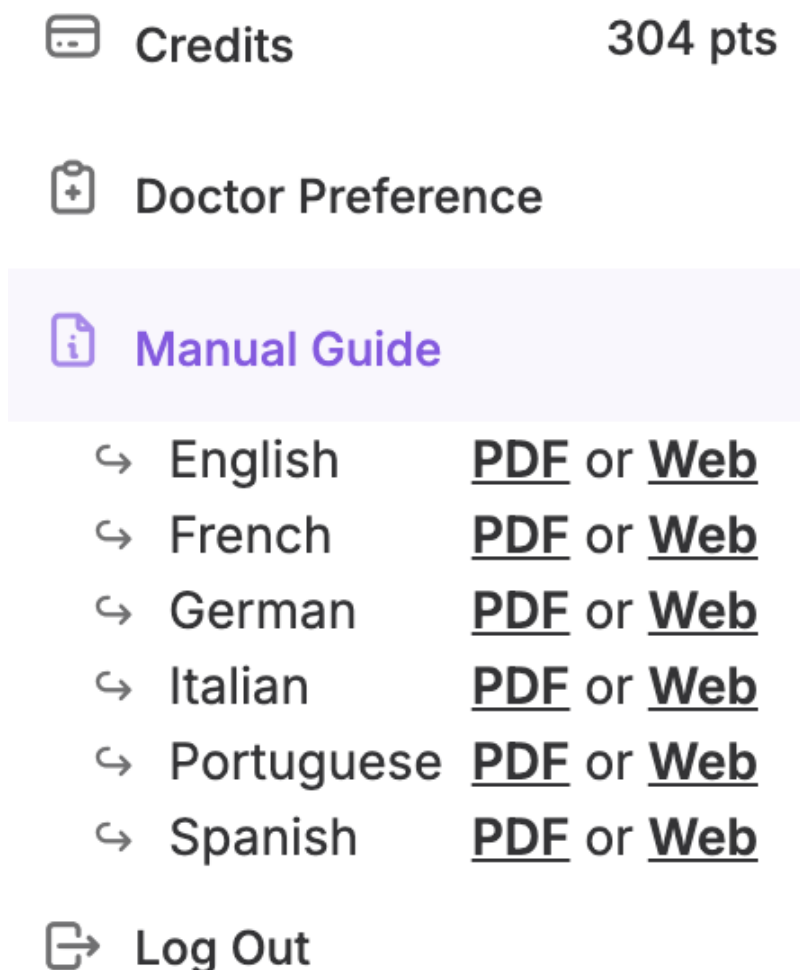

Contenuti



DR. ANNIE™ INSIGHTS

Here to provide personalized assistance and guidance to help you address any dental concerns you may have.

- ✓ AI Dental Findings
- ✓ Timepoint Feature
- ✓ Report Generating
- ✓ AnnieInsight+

- 01 Log In
- 02 Naviga la pagina principale
- 03 Crea un nuovo profilo paziente
- 04 Modifica profilo paziente
- 05 Crea Timepoint
- 06 Carica immagini intraorali
- 07 Carica immagini extraorali
- 08 Modifica la cartella dentale
- 09 Carica immagini X-Ray e modulo HLD
- 10 Revisione e verifica dei risultati AI
- 11 Genera il Report
- 12 Revisione dei Report
 - ~ Tier
 - ~ User Credit
 - ~ Pricing & Tier Upgrade Guidelines
 - ~ Usage History
 - ~ Top Up
 - ~ Patient Case Search
 - ~ Doctor Preference
 - ~ Sample Case



Step 1: Log In / Accedi (1)

01

Vai su iSmartDDS.com nel tuo browser per accedere alla piattaforma DR. ANNIE™ Insights. Verrà visualizzata la pagina di accesso.


02

Seleziona l'opzione di login preferita:


- **SIGN IN WITH GOOGLE SSO**
- **EMAIL & PASSWORD**

03

Se preferisci registrarti e utilizzare DR. ANNIE™ senza un account Google SSO, fai clic sul link "Crea un account qui" (vedi freccia rossa). Verrai reindirizzato al [iSmartOffice registration portal](#).
Fai riferimento alla pagina successiva per ulteriori dettagli.

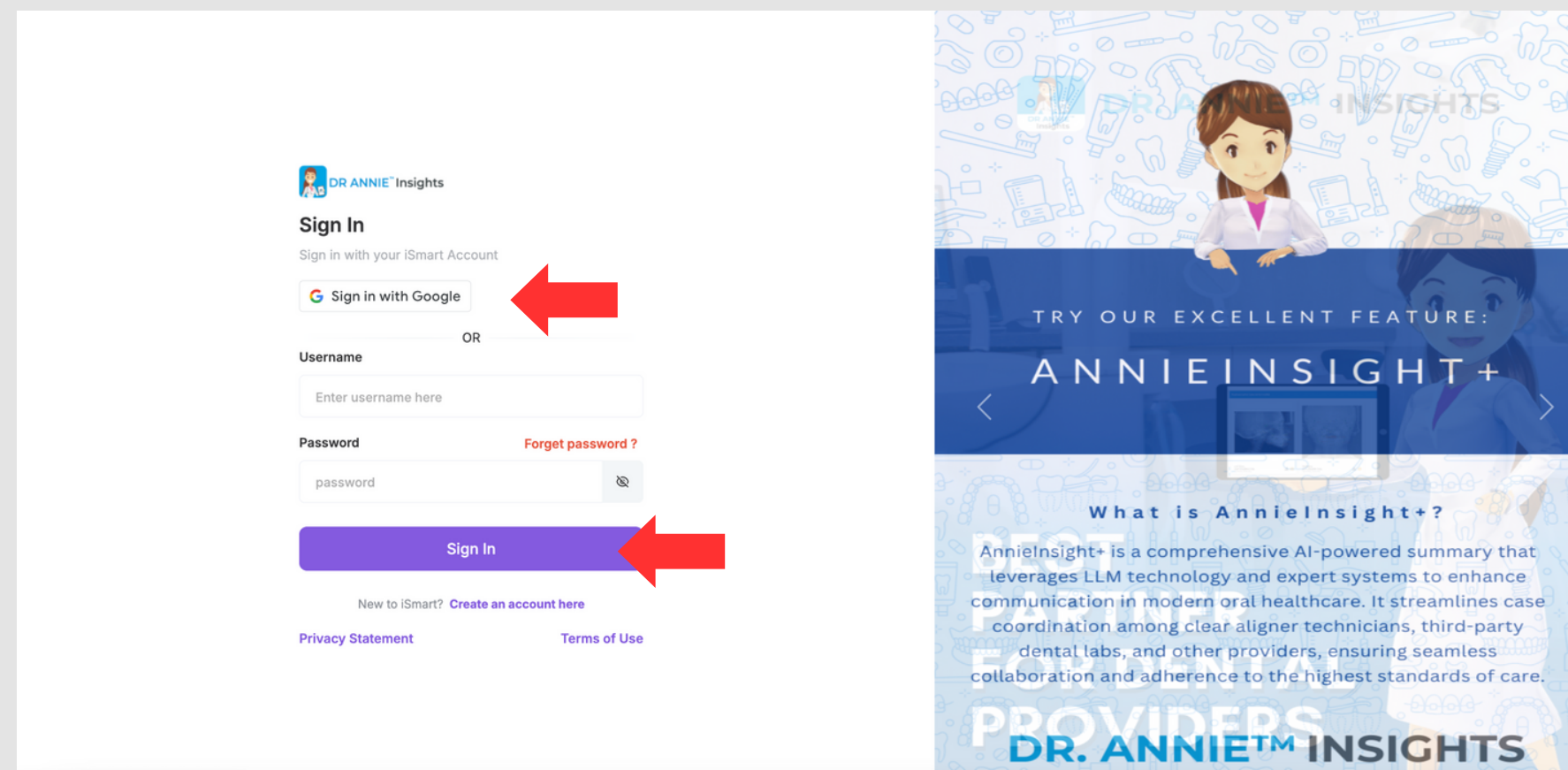

Continue...

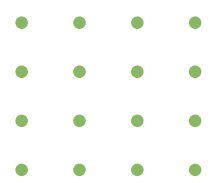

Step 1: Log In / Accedi (2)

04

Inserisci le informazioni richieste in questo modulo di registrazione. Una volta verificate tutte le informazioni, clicca sul pulsante di registrazione per continuare.

05

Conferma la registrazione tramite l'email fornita. Una volta confermata, l'account sarà pronto per l'uso.

The screenshot shows the 'iSmartOffice - Provider' registration page. At the top, there is a search bar and links for 'Register' and 'Login'. The main section is titled 'PROVIDER REGISTRATION FORM' and contains several input fields: 'First Name', 'Last Name', 'Username' (with a hint 'Use email address as your username'), 'Password', 'Retype Password', and 'Referral Code' (with a hint 'if any'). At the bottom right, there are two buttons: 'Back' (orange) and 'Register' (blue). A red arrow points to the 'Register' button. A small red bell icon is visible in the bottom right corner of the page.




Step 2: Navigate the Home Page / Naviga la pagina principale

01

Dopo l'accesso, la pagina principale mostra due sezioni principali:

- **LEFT: ACTIVE & ARCHIVE PATIENT**
- **CENTER: PATIENT LIST**

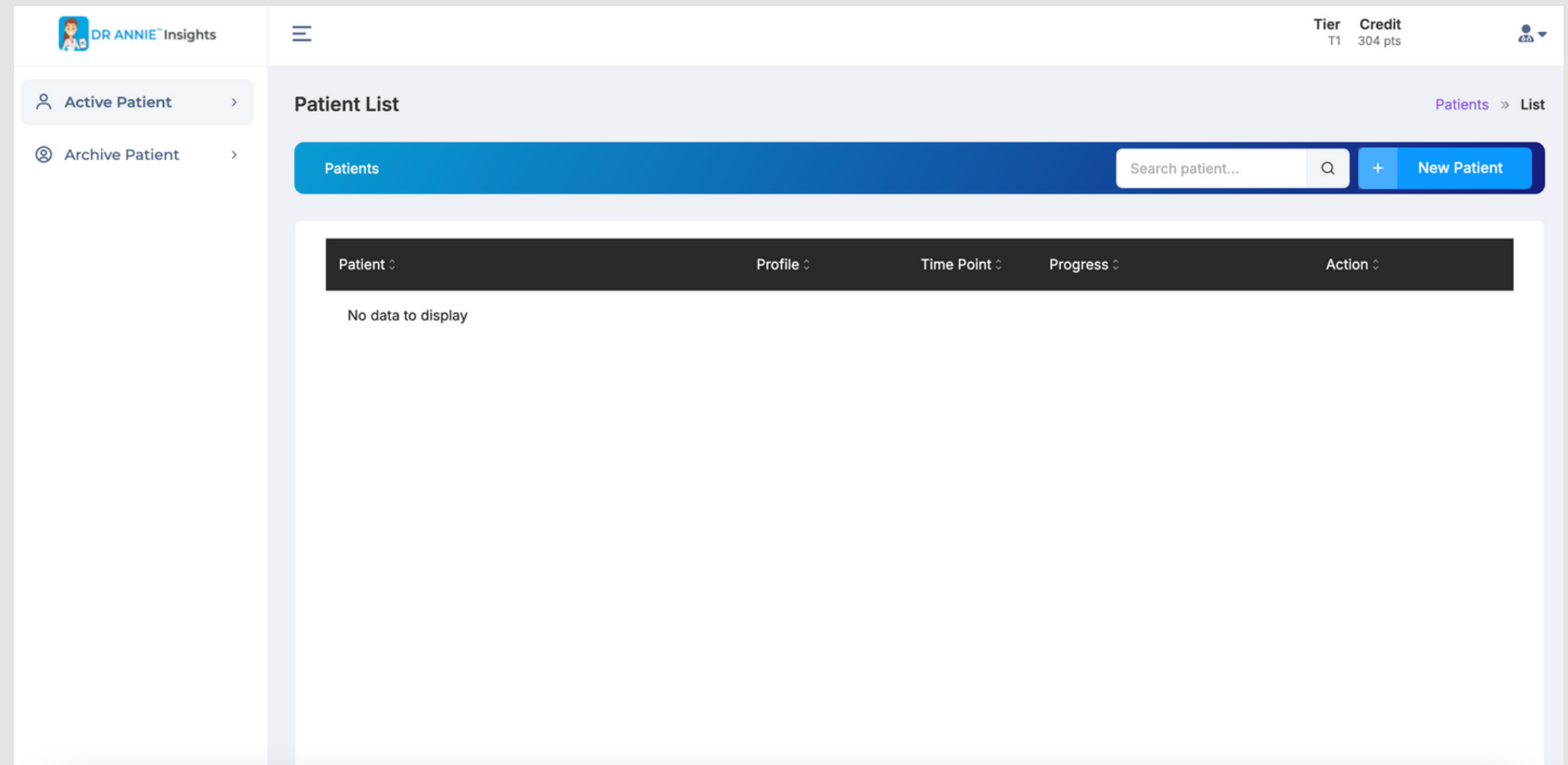

Step 3: Create a New Patient Profile / Crea un nuovo profilo paziente

01

Fai clic su 'New Patient' (vedi freccia rossa).

Prima di aggiungere il nome del paziente, aggiungi prima un credito affinché DR. ANNIE™ possa continuare il processo di analisi.

Per i dettagli, consulta la sezione [User Credit](#) o [Top Up](#).

02

Inserisci i dati richiesti.


Tutti i campi devono essere compilati prima di procedere.

03


Rivedi e accetta la HIPAA Compliance Policy.

04

Fai clic su 'Submit' per salvare il profilo.

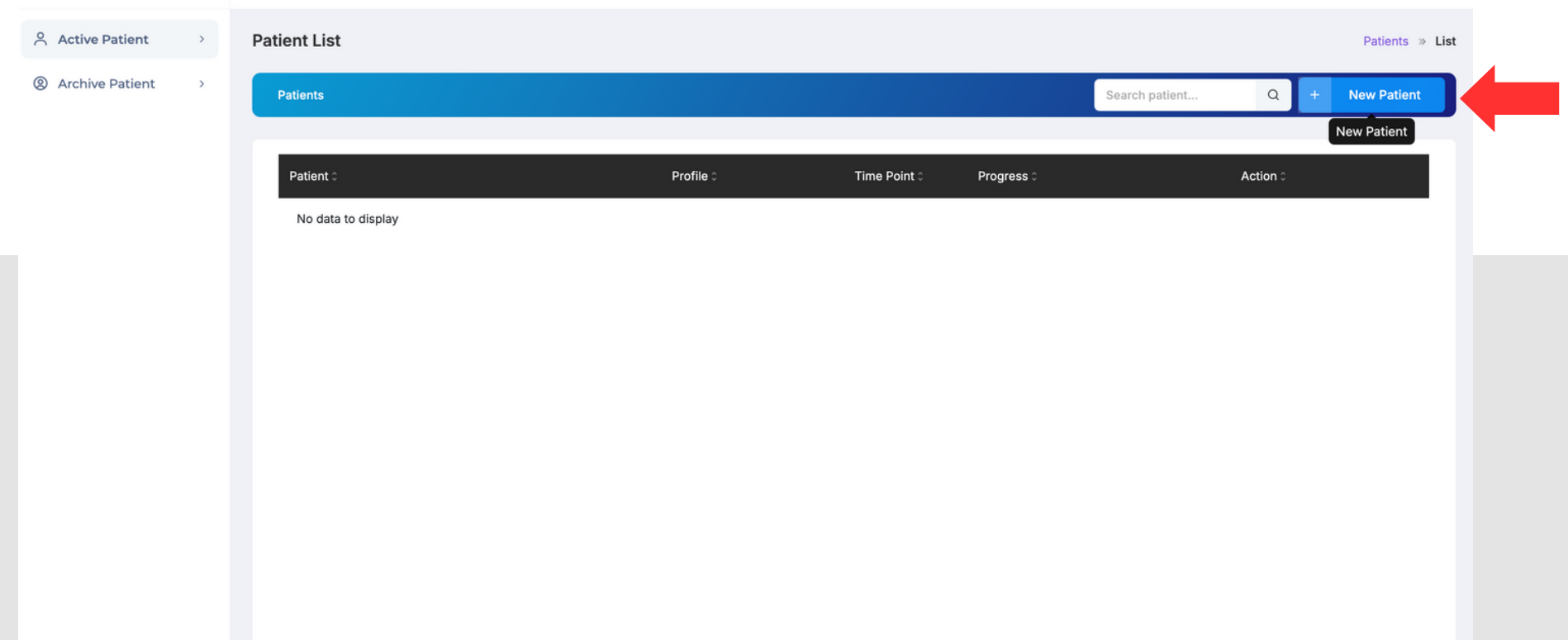

The screenshot shows the 'Patient List' interface. On the left, there are tabs for 'Active Patient' and 'Archive Patient'. The main area has a search bar and a 'New Patient' button, which is highlighted with a red arrow. Below the search bar, there is a table with columns: Patient, Profile, Time Point, Progress, and Action. The table is currently empty, showing 'No data to display'.

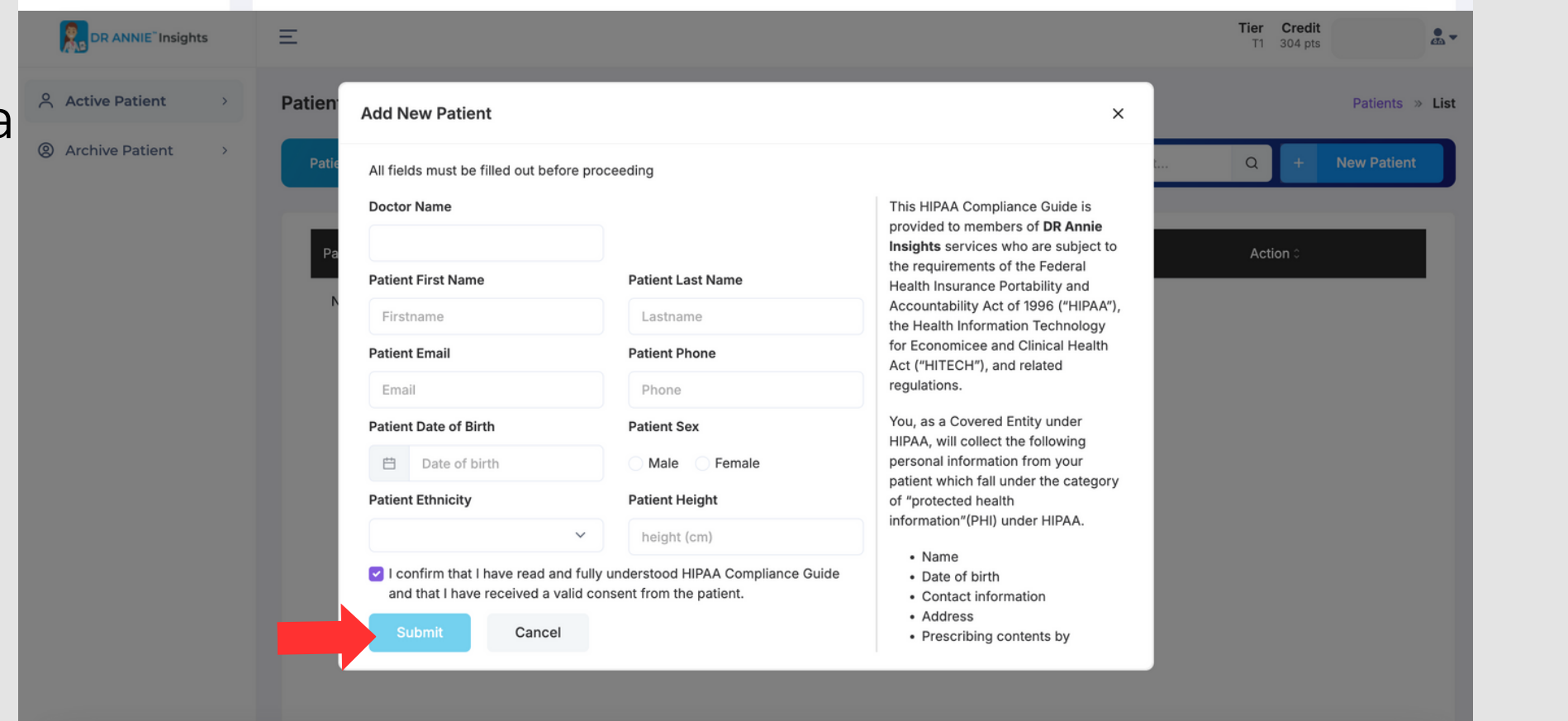

The screenshot shows the 'Add New Patient' form. It includes fields for Doctor Name, Patient First Name, Patient Last Name, Patient Email, Patient Phone, Patient Date of Birth, Patient Sex, Patient Ethnicity, and Patient Height. A red arrow points to the 'Submit' button. On the right side of the form, there is a HIPAA Compliance Guide section with a list of collected information: Name, Date of birth, Contact information, Address, and Prescribing contents by.

Step 4: Edit Patient Profile / Modifica profilo paziente

01



Fai clic sul nome del paziente nell'angolo in alto a sinistra (vedi freccia rossa).

02

Modifica le informazioni necessarie.

03

Fai clic su 'Submit' per salvare o su 'Cancel' per tornare indietro.

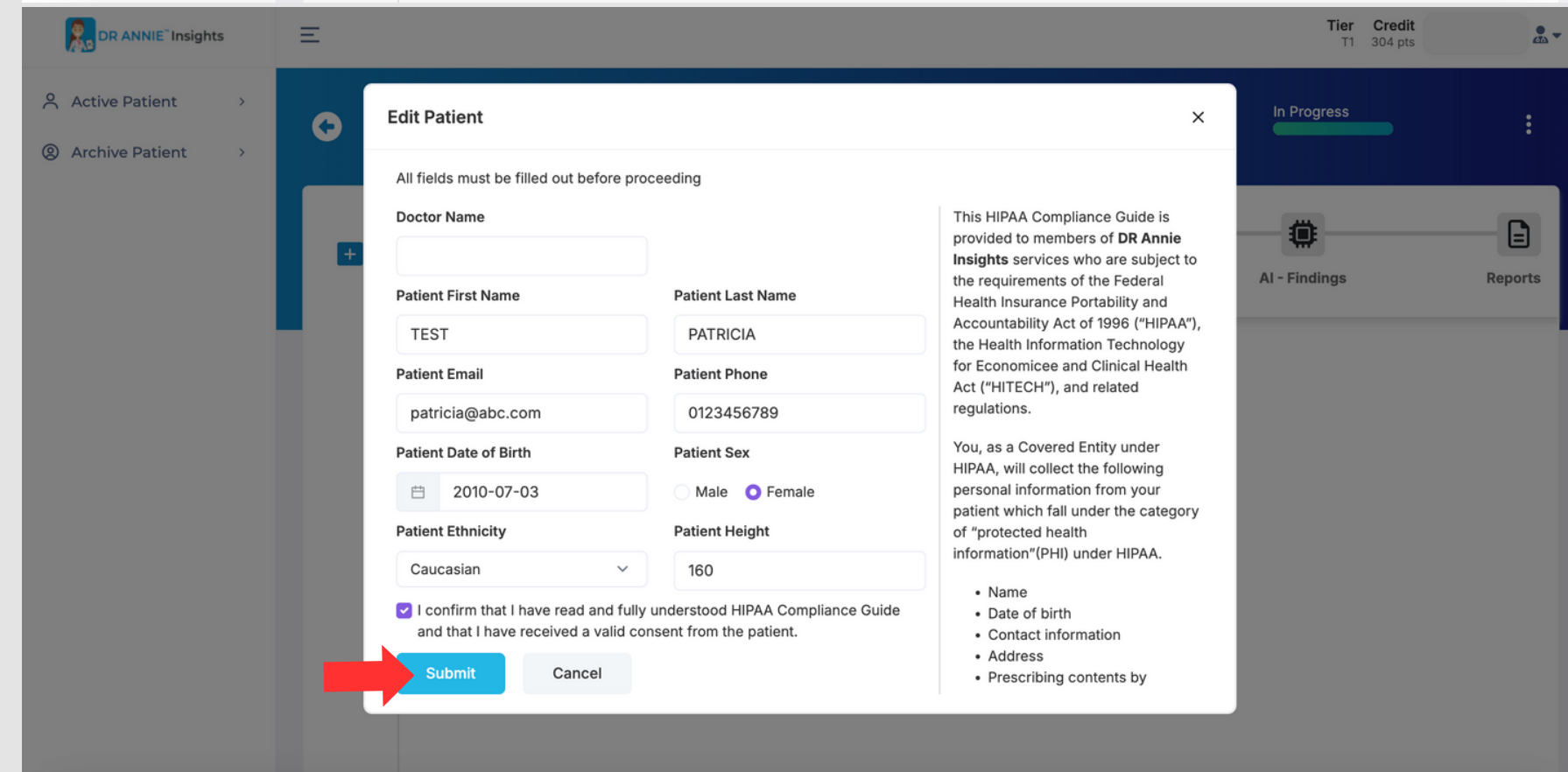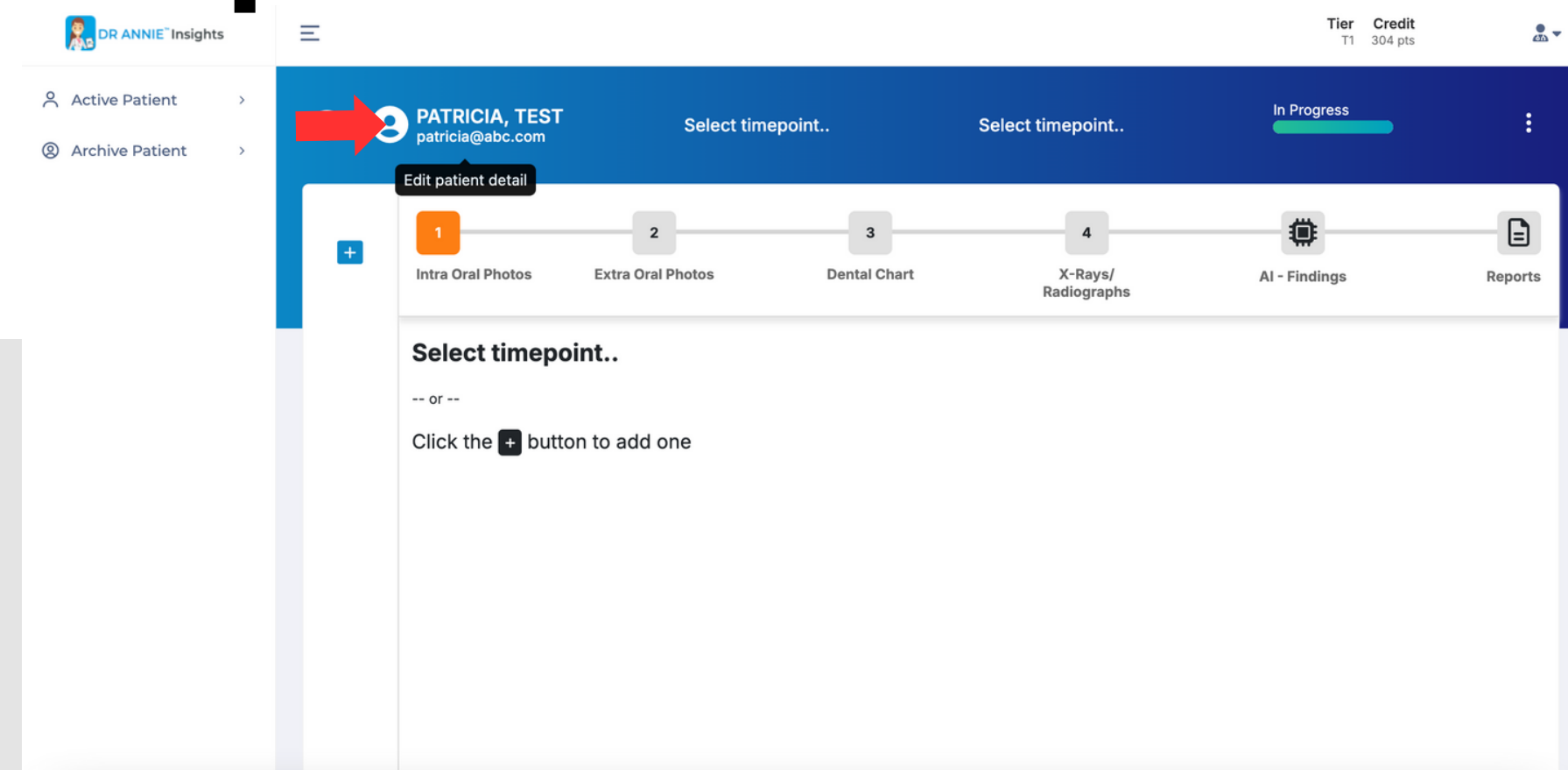

Step 5: Create Timepoint / Crea Timepoint



01

Prima di creare un nuovo caso o timepoint, assicurati di controllare le impostazioni di Doctor Preference. Questa pagina mostra i trattamenti e gli strumenti preferiti che verranno utilizzati come predefiniti per generare i report dei tuoi casi.

Consulta la pagina **'Doctor Preference'** per ulteriori dettagli.

02


Fai clic sul pulsante '+ New Timepoint' per creare un nuovo timepoint (vedi freccia rossa).

03

Fai clic su 'Save' per creare il timepoint e su 'Close' per tornare indietro.

Nota:

- Puoi anche creare più di un timepoint.
- Assicurati di avere abbastanza crediti per creare un nuovo timepoint.
- Se la data del timepoint appena aggiunto è precedente a quella esistente, il report del timepoint esistente verrà rimosso. Tuttavia, non preoccuparti: puoi rigenerare il report in qualsiasi momento.

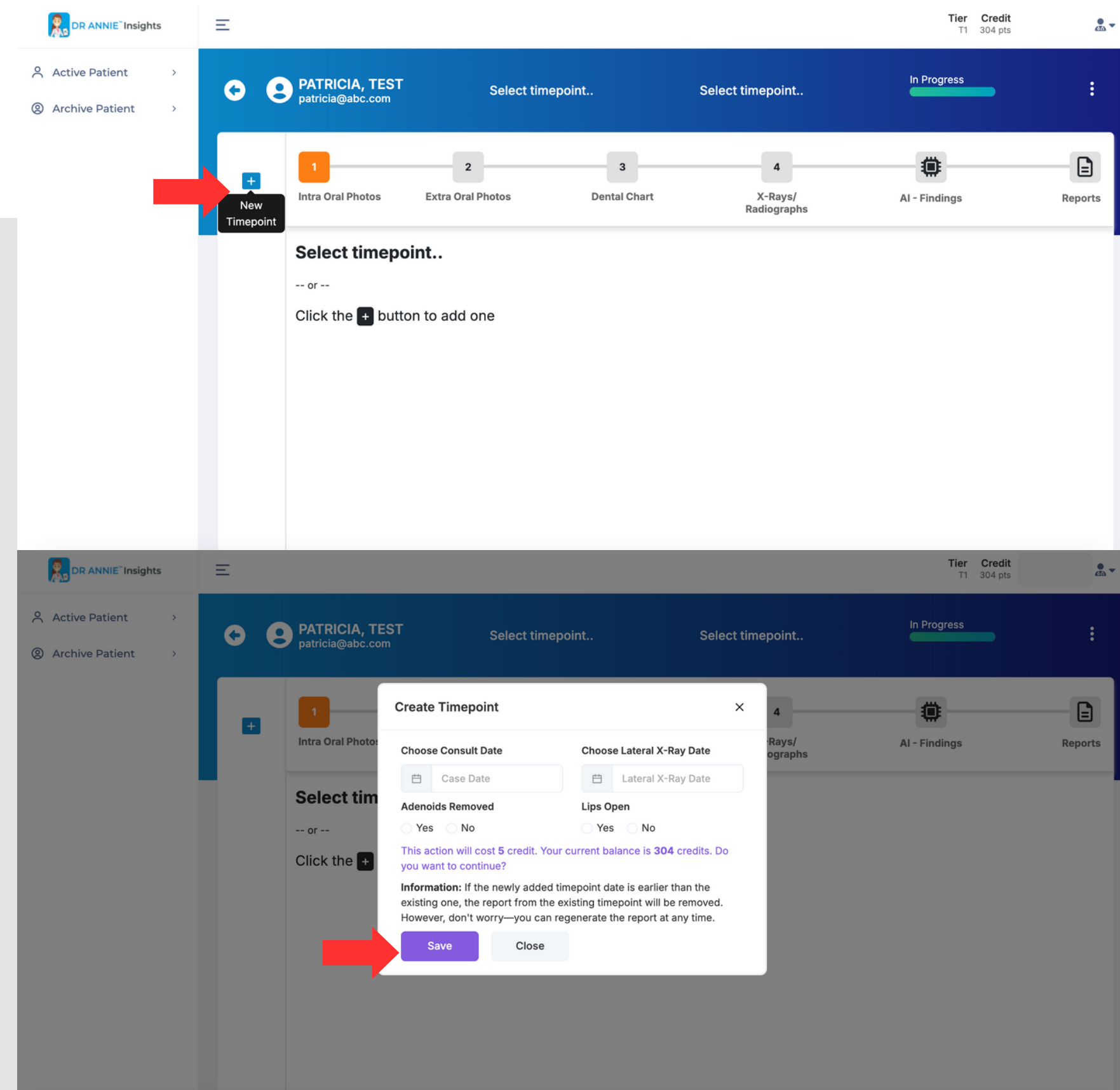

Step 6: Upload Intra-oral Images / Carica immagini intraorali

01

Fai clic sulla casella di caricamento per le foto intraorali. Trascina i file nell'area designata oppure fai clic per selezionarli manualmente.

02



Assicurati che le immagini rispettino le specifiche richieste (ad esempio, dimensioni e nitidezza) per consentire un riconoscimento accurato da parte dell'AI.

03

Le funzioni Zoom, Ruota, Specchia e Reimposta sono disponibili se necessarie.

04

Dopo aver caricato tutte le immagini richieste, fai clic su 'Next' per procedere. Questo passaggio è obbligatorio e non è possibile continuare senza completarlo.

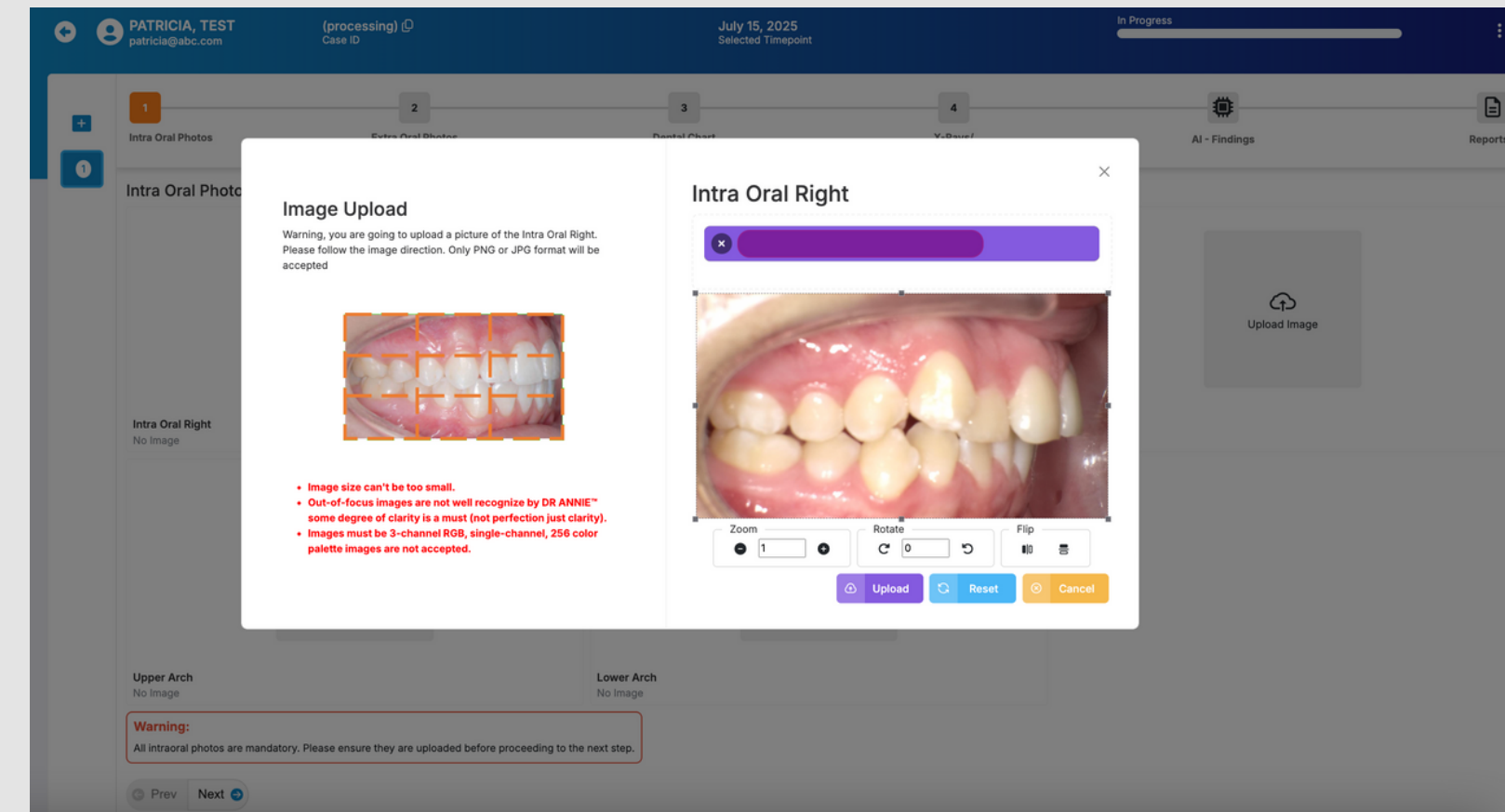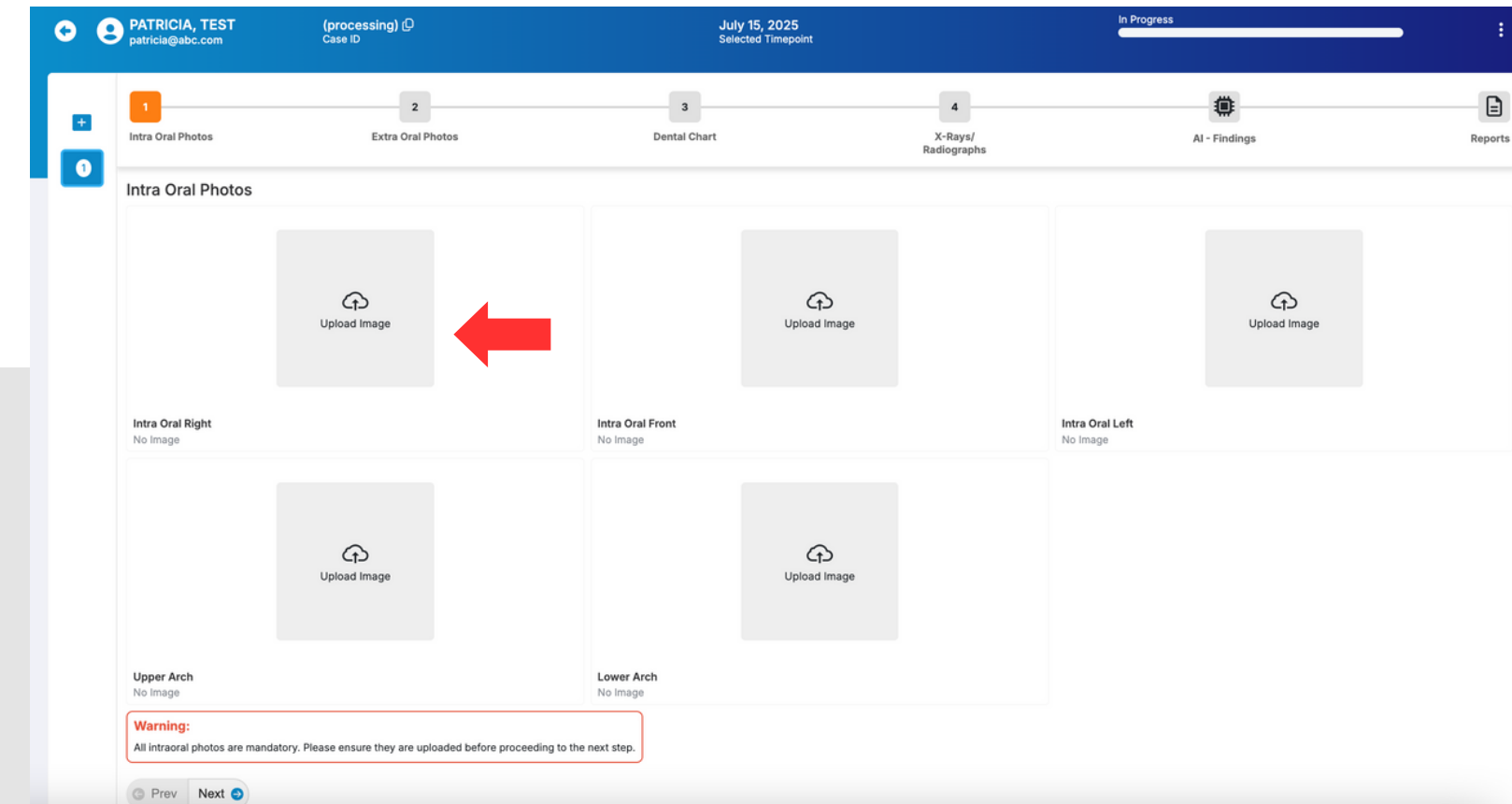




Step 7: Upload Extra-oral Images / Carica immagini extraorali

01

Nella schermata successiva, carica le foto extraorali.

02

Questo passaggio è facoltativo; puoi fare clic su 'Next' se non è necessario.

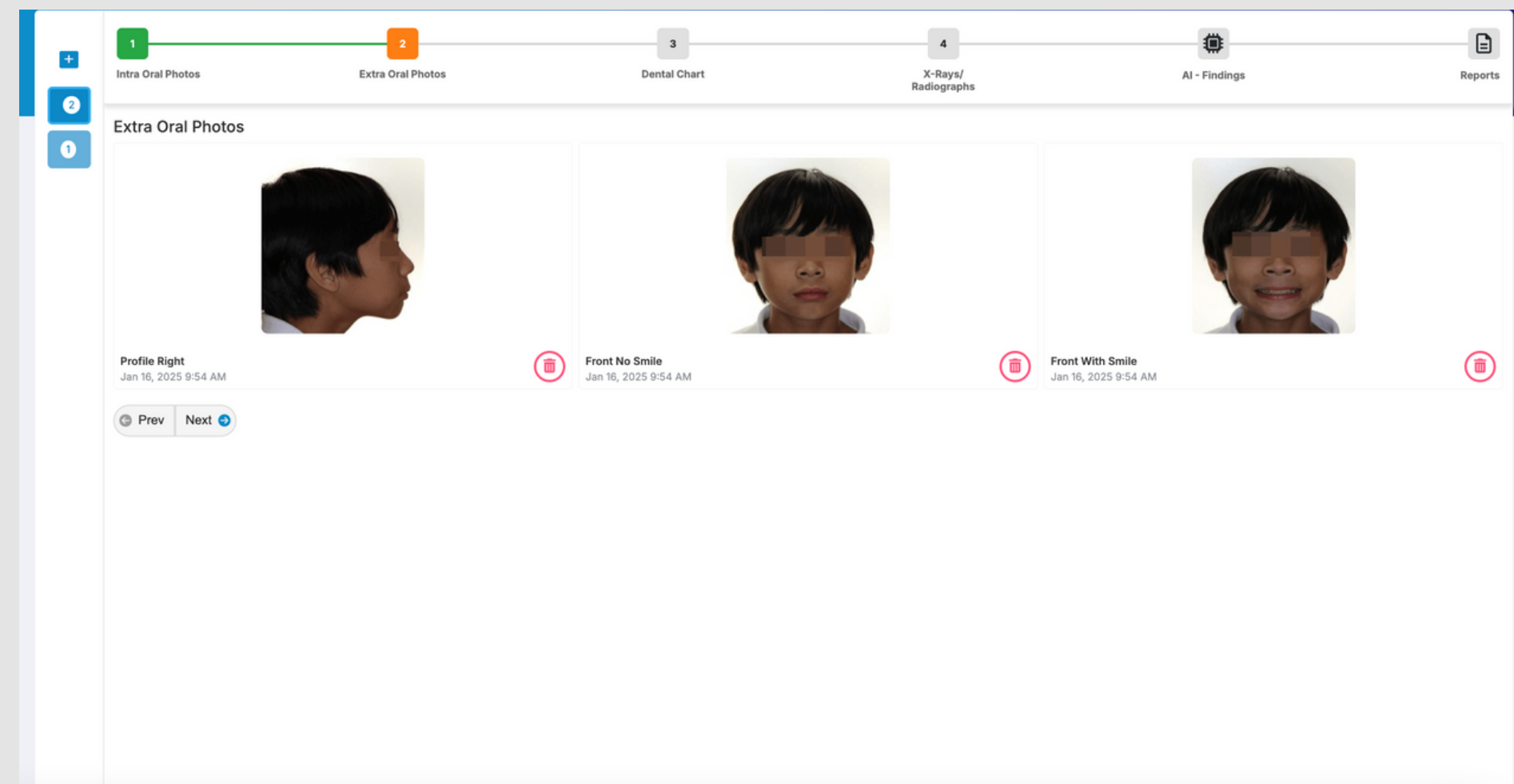

Step 8: Edit Dental Chart / Modifica la cartella dentale

01

Fai clic sui pulsanti Upper Arch e Lower Arch (inclusi i quadranti destro e sinistro) per inserire le informazioni richieste.

02

Regola la condizione dei denti (permanenti e decidui) da analizzare nella cartella dentale. Questo influenzerà i risultati dell'analisi di DR. ANNIE™.

03

Il Sequence Worksheet non sarà disponibile se mancano i primi molari o gli incisivi centrali.

04

Questo passaggio è facoltativo; puoi fare clic su 'Next' se non è necessario.

Dental Chart

Upper Arch

Upper Right Quadrant

Upper Left Quadrant

Permanent Teeth

Deciduous Teeth

Lower Arch

Lower Right Quadrant

Lower Left Quadrant

T01 :
T02 :
T03 :
T04 :
T05 :
T06 :
T07 :
T08 :
T09 :
T10 :

Disclaimer:

- Certain dental condition, such as extreme missing teeth or anomalies, may not be accurately detected by the current version of our AI engine. Verification by a doctor is needed.
- Please note: Sequence Worksheet report will not be available if there are missing 1st molar(s) OR missing central incisor(s).

Prev Next

Dental Chart

Arch Parameter

Single Arch Parameters

☒ None

☐ Partial denture

☐ Complete denture

☐ Denture cleaning

☐ Orthodontic

Save Cancel

Tooth Status - Permanent - 01

Adult No. 01

Tooth Parameter

☒ None

☐ Missing (this option will be used on report generation)

☐ Extraction needed

☐ Restoration crown needed

Mesial

☐ Caries ☐ Filling

Distal

☐ Caries ☐ Filling

Buccal

☐ Caries ☐ Filling

Lingual/Palatal

☐ Caries ☐ Filling

Occlusal

☐ Caries ☐ Filling

Save Cancel

Step 9: Upload X-Ray Images & HLD Form / Carica immagini X-Ray e modulo HLD (1)

01

Carica le seguenti immagini X-ray:

- **LATERAL X-RAY**
- **FRONTAL X-RAY (OPTIONAL)**
- **PANORAMIC X-RAY (OPTIONAL)**

02

Il caricamento dell'immagine X-ray laterale è obbligatorio, in quanto necessaria per generare il report.

Continue...

The screenshot displays a multi-step process bar at the top with six stages: 1. Intra Oral Photos, 2. Extra Oral Photos, 3. Dental Chart, 4. X-Rays/Radiographs (highlighted in orange), 5. AI - Findings, and 6. Reports. Below the bar, the 'X-Rays / Radiographs' section shows three upload slots. The first slot contains a 'Lateral Cephalometric' X-ray image with a timestamp of 'Jan 16, 2025 9:54 AM' and a red trash icon. The second slot contains a 'Frontal Cephalometric' X-ray image with a timestamp of 'Feb 14, 2025 2:52 AM' and a red trash icon. The third slot contains a 'Dental Panoramic' X-ray image with a timestamp of 'Jan 16, 2025 9:55 AM' and a red trash icon.

Step 9: Upload X-Ray Images & HLD Form / Carica immagini X-Ray e modulo HLD (2)

Warning: The automated HLD calculation will only work if you have uploaded the lateral image, frontal image, panoramic X-ray, and upper & lower arch images. Please ensure all required images are uploaded before proceeding with the form.

3

HLD Form

HLD Summary

===== HLD Summary =====

1. Is there an impacted maxillary central incisor? : No
2. What is the condition of the patient oral hygiene? : Good
3. Does the patient does have any dental deformity? : No
Detail :
4. Does the patient have any traumatic deviations? : No
Detail :

4

Prev Next

03

Fai clic su 'HLD Form' per modificarlo, quindi fai clic su 'Save' per applicare le modifiche.

Il calcolo automatico dell'HLD funzionerà solo se hai caricato l'immagine lateral, frontal, la panoramic X-ray e le immagini delle upper & lower arch.

Assicurati di aver caricato tutte le immagini richieste prima di procedere con la compilazione del modulo.

04

Fai clic su 'Next' per rivedere i risultati dell'AI.

HLD Form

Is there an impacted maxillary central incisor?

☒ No ☐ Yes

What is the condition of the patient's oral hygiene?

☐ Poor ☒ Good ☐ Excellent

Does the patient have any dental deformity?

☒ No ☐ Yes

Please describe the dental deformity in detail, if present.

Does the patient have any severe traumatic deviations?

☒ No ☐ Yes

If applicable, provide a brief description of the severe traumatic deviations.

Does the patient have surgical malocclusion?

☒ No ☐ Yes

What is the number of ectopic eruption teeth present?

0

Is there a posterior crossbite, and does at least one of the affected teeth have to be a molar?

☒ No ☐ Yes

Cancel

Save

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisione e verifica dei risultati AI (1)

01

La pagina AI-Findings mostra i risultati rilevati dall'AI in base alle immagini e alle informazioni precedentemente caricate, inclusi i seguenti elementi: Intraoral, Extraoral, Panoramic Radiographs, Cephalometric (Lateral and Frontal) e Dental Arch (Upper and Lower).

02

Potrebbero essere necessari uno o due minuti affinché l'AI completi l'analisi e identifichi i risultati dentali.

Continue...

The screenshot displays the 'AI - Findings' interface. At the top, a progress bar shows five steps: 1. Intra Oral Photos, 2. Extra Oral Photos, 3. Dental Chart, 4. X-Rays/Radiographs, and 5. AI - Findings (highlighted with an orange gear icon). A 'Reports' icon is at the far right. On the left, a vertical sidebar contains a '+' icon and numbered buttons 1, 2, and 3. The main content area is titled 'Intra Oral' and contains a grid of six dental images: Intra Oral Right, Intra Oral Front, Intra Oral Left, Upper Arch, and Lower Arch. Each image has a green checkmark and the text 'Not available' below it. Below the grid, there are expandable sections for 'Extra Oral', 'Panoramic Radiographs', 'Cephalometric (Lateral & Frontal)', and 'Dental Arch'. A red-bordered warning box at the bottom states: 'Warning: Please verify the Cephalometric and Dental Arch sections before proceeding to the next step. Click the yellow 'Verify' button located below the Cephalometric and Dental Arch images to confirm the results. Ensure that you carefully review both the Cephalometric (Lateral & Frontal) and Dental Arch (Upper & Lower) sections, as they are critical components of treatment planning and staging. The AI-generated report will be based on this information. For detailed instructions, please refer to the Instruction Manual'. At the very bottom, there are 'Prev' and 'Next' navigation buttons.

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisione e verifica dei risultati AI (2)

03


Scorri verso il basso per trovare le sezioni Cephalometric e Dental Arch. Verifica entrambe le sezioni.

04

Fai clic sul pulsante giallo 'Verify' sotto le immagini Cephalometric e Dental Arch per confermare i risultati (vedi freccia rossa).

Assicurati di rivedere entrambe le sezioni: Cephalometric (Lateral & Frontal) e Dental Arch (Upper & Lower).

Continue...

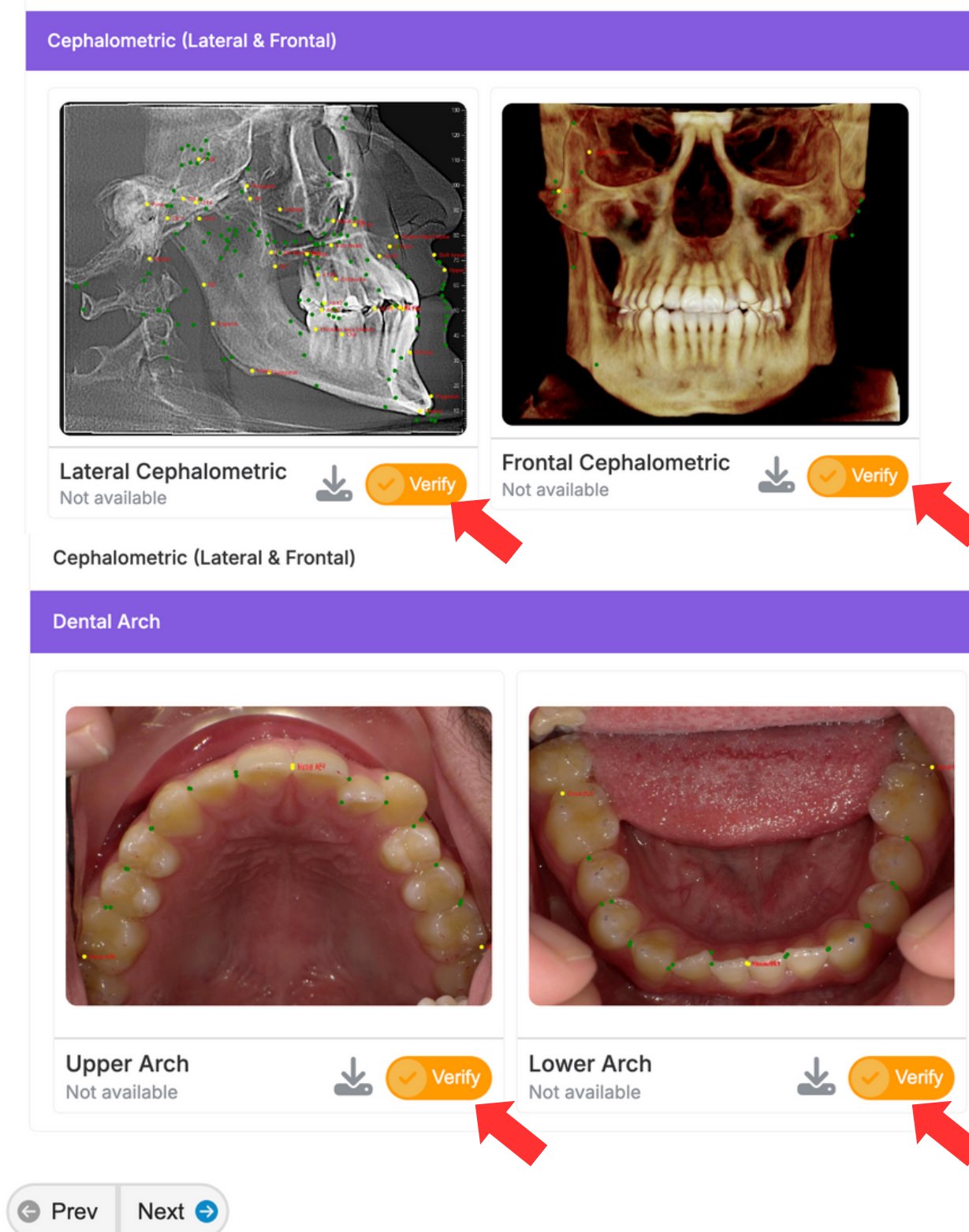

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisione e verifica dei risultati AI (3)

05

Dopo aver fatto clic sul pulsante 'Verify' sotto Lateral Cephalometric, lo schermo apparirà come mostrato.

Rivedi manualmente i punti rilevati dall'AI per garantirne l'accuratezza. Puoi trascinare e rilasciare i punti secondo necessità.

Le istruzioni sono disponibili nell'angolo in basso a sinistra. Puoi anche ingrandire o ridurre l'immagine durante la digitalizzazione usando il mouse.

Le linee guida per la digitalizzazione appariranno nell'angolo in alto a destra quando clicchi su uno dei punti, per tuo riferimento.



Continue...

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisione e verifica dei risultati AI (4)



06


Utilizza le funzioni nella barra superiore — come Reset Process, API Template Percentage e i cursori di Contrasto e Luminosità — secondo necessità.

- Reset Process: Ti permette di ricominciare da capo se desideri rifare la digitalizzazione.
- API Template Percentage: Se l'AI non riesce a generare risultati accurati o se mancano alcuni punti, utilizza il template API al 60% o 70% finché l'AI non rileva correttamente i punti. Regola la percentuale in base alle necessità.
- Cursori di Contrasto e Luminosità: Regolali per migliorare la visibilità dell'immagine e mettere in evidenza i dettagli importanti.

07

Una volta terminata la revisione dei punti, fai clic sul pulsante verde 'Save' nell'angolo in alto a sinistra (vedi freccia rossa). Successivamente, fai clic sul pulsante con la freccia gialla per tornare indietro.

Continue...

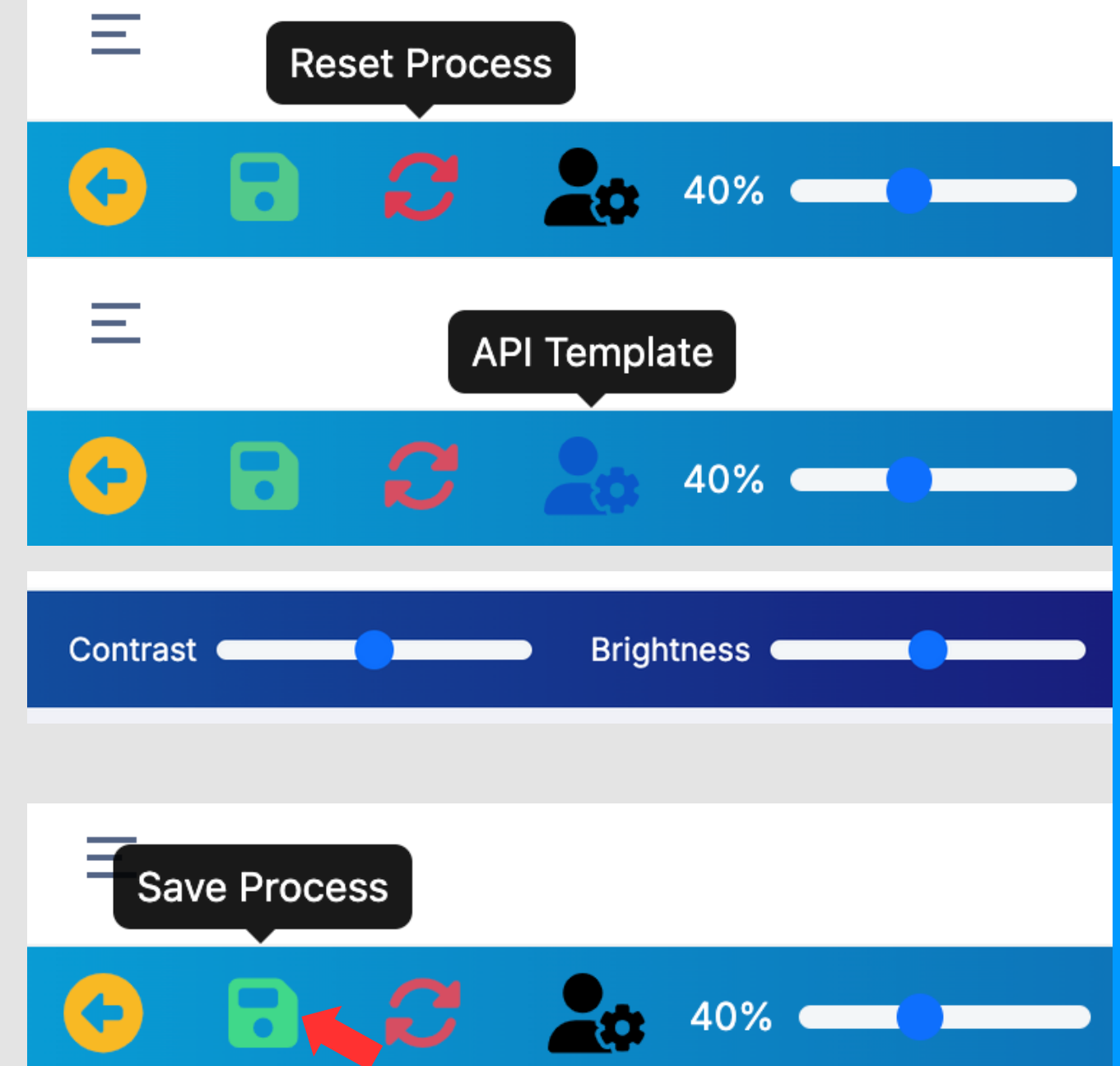

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisione e verifica dei risultati AI (5)

08

Una volta completato il passaggio 'Verify' per l'immagine, il pulsante cambierà in un'icona gialla con il simbolo 'Check'.

09

Assicurati di 'Verificare' (o rivedere) entrambe le sezioni **Cephalometric (Lateral & Frontal)** e **Dental Arch (Upper & Lower)** prima di procedere, poiché rappresentano componenti fondamentali per la pianificazione e la definizione delle fasi del trattamento.

Il report generato dall'AI si baserà su queste informazioni.

10


Una volta completato il processo di verifica, fai clic su 'Next' per generare il report.

Nota: non puoi procedere al passaggio successivo senza aver verificato entrambe le sezioni.


Verified



Cephalometric (Lateral & Frontal)

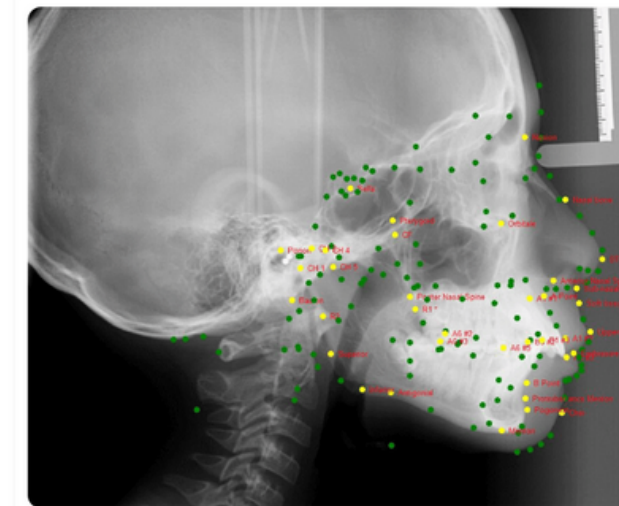

Lateral Cephalometric
Jan 16, 2025 10:04 AM

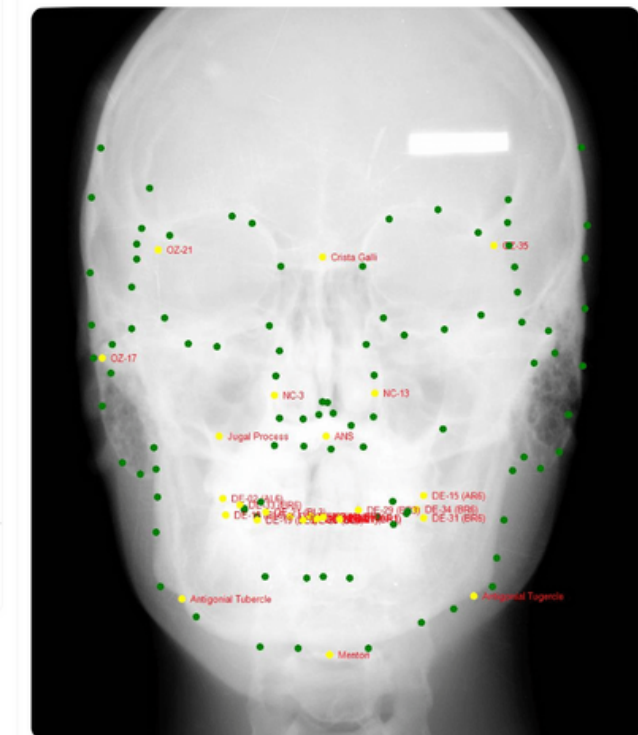

Frontal Cephalometric
Feb 14, 2025 4:08 AM



Dental Arch

Prev Next



Step 11: Generate the Report / Genera il Report (1)

Il Report ha 4 livelli:



Report	Required	Details
Standard	Lateral cephalometric image and intraoral photos	• Fornisce un report di base con un'accuratezza di circa il 70% • Adatto per valutazioni rapide • Report generato in 2–3 minuti
Standard+	Lateral cephalometric image, intraoral photos, and panoramic X-ray	• Offre un report più dettagliato, inclusi il livello di difficoltà del caso e la pianificazione delle fasi del trattamento • Accuratezza intorno all'80% • Report generato in 3–5 minuti
Complete	Lateral and frontal cephalometric images, panoramic X-ray, and intraoral photos	• Ideale per casi con crossbite o asimmetria facciale • Fornisce un'analisi dettagliata con un'accuratezza dell'85–90% e pianificazione del trattamento • Report generato in 5–8 minuti, a seconda della complessità
VIP	For complex cases such as those with multiple missing teeth, supernumerary teeth, congenital anomalies, or surgical needs	• Revisionato sia dall'AI che da ortodontisti esperti • Report disponibile entro 1–3 giorni (non in tempo reale) • Progettato per la pianificazione di trattamenti altamente complessi

Step 11: Generate the Report / Genera il Report (2)

01

Seleziona il tipo di report da generare:

- **STANDARD**
- **STANDARD+**
- **COMPLETE**
- **VIP**

Per il VIP Report, gli utenti verranno reindirizzati a una pagina speciale.


Questa pagina offrirà servizi specialistici, eseguiti da medici esperti.

02

Per generare un Standard Report, sono richiesti almeno un lateral cephalogram X-ray verificato e l'archata dentale inferiore.

03

Il Standard Report verrà generato in 2–3 minuti, il Standard+ Report in 3–5 minuti e il Complete Report in 5–8 minuti.

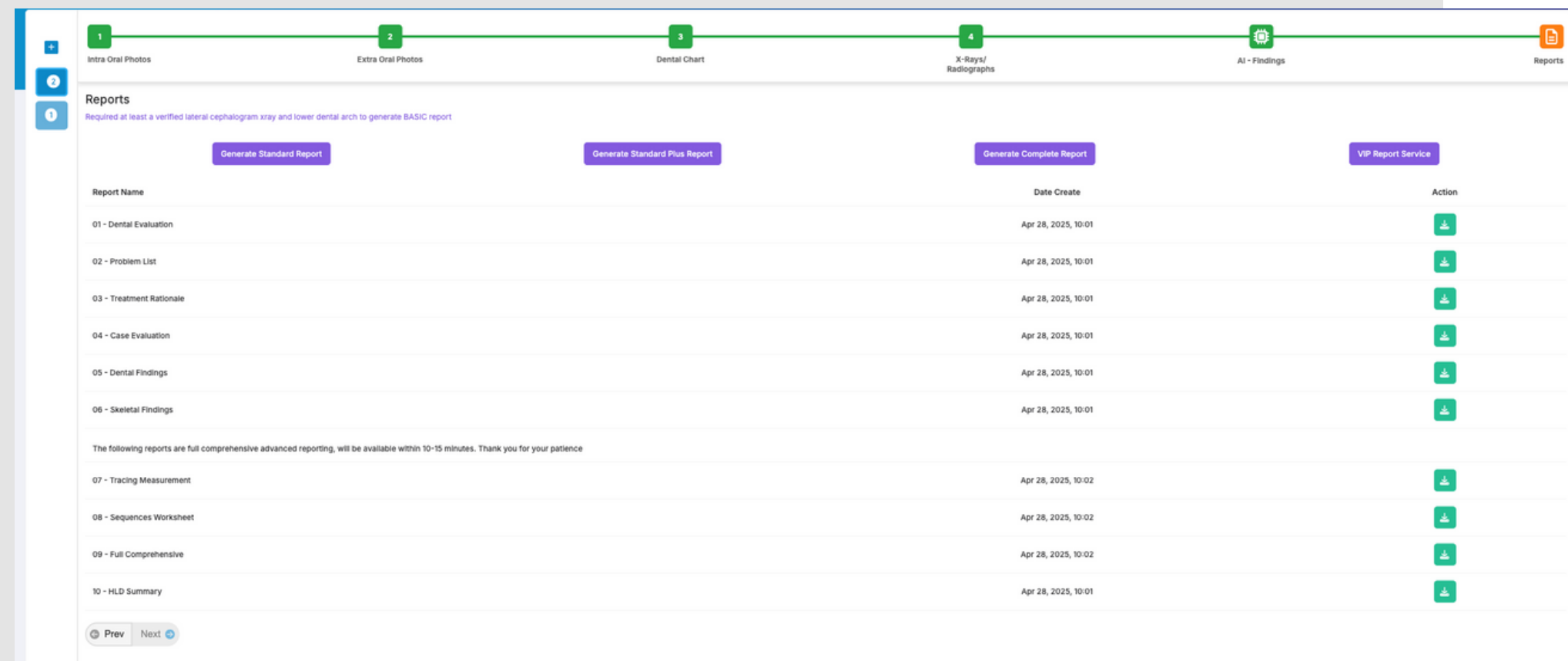

The screenshot shows a software interface for generating dental reports. At the top, a progress bar with five steps is visible: 1. Intra Oral Photos, 2. Extra Oral Photos, 3. Dental Chart, 4. X-Rays/Radiographs, and 5. AI - Findings. Below the progress bar, there are four buttons: 'Generate Standard Report', 'Generate Standard Plus Report', 'Generate Complete Report', and 'VIP Report Service'. The main area displays a table of reports with columns for 'Report Name', 'Date Create', and 'Action'.

Report Name	Date Create	Action
01 - Dental Evaluation	Apr 28, 2025, 10:01	
02 - Problem List	Apr 28, 2025, 10:01	
03 - Treatment Rationale	Apr 28, 2025, 10:01	
04 - Case Evaluation	Apr 28, 2025, 10:01	
05 - Dental Findings	Apr 28, 2025, 10:01	
06 - Skeletal Findings	Apr 28, 2025, 10:01	
The following reports are full comprehensive advanced reporting, will be available within 10-15 minutes. Thank you for your patience		
07 - Tracing Measurement	Apr 28, 2025, 10:02	
08 - Sequences Worksheet	Apr 28, 2025, 10:02	
09 - Full Comprehensive	Apr 28, 2025, 10:02	
10 - HLD Summary	Apr 28, 2025, 10:01	

At the bottom left of the table, there are 'Prev' and 'Next' navigation buttons.

Continue...

Step 11: Generate the Report / Genera il Report (3)

04

Per il servizio VIP Report, gli utenti verranno reindirizzati a una pagina in cui i dati saranno compilati automaticamente.

Dopo averli verificati e confermato che tutte le informazioni sono corrette, invia la richiesta.

05

Il report sarà elaborato dall'AI e da un ortodontista esperto, con una durata che dipende dalla complessità del caso — generalmente da 1 a 3 giorni.

Una notifica via email verrà inviata non appena il VIP Report sarà completato.

Generate VIP Report

Patient Info

Patient First Name

TEST

Patient Last Name

Patient Email

Patient Phone

Patient Date of Birth

Patient Sex

F

Patient Ethnicity

CA

Patient Height (cm)

168

Intra Oral

Upper Arch

No Image

Lower Arch

No Image

X-Rays / Radiographs

Lateral Cephalometric

No Image

Upload Image

Frontal Cephalometric

No Image

Dental Panoramic

No Image

By continuing, you agree to the VIP Report processing fee and acknowledge that any previous report will be overwritten. Are you sure to submit the data?

Submit

Cancel



Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (1)

Ogni report fornisce informazioni dettagliate, con diversi livelli di accuratezza, sulla condizione dentale del paziente, inclusi:

1. DENTAL EVALUATION
2. PROBLEM LIST
3. TREATMENT RATIONALE
4. CASE EVALUATION
5. DENTAL FINDINGS
6. SKELETAL FINDINGS
7. TRACING MEASUREMENTS
8. SEQUENCES WORKSHEET
9. FULL COMPREHENSIVE ANALYSIS
10. HLD SUMMARY

Continue...

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (2)

01

Dental Evaluation

Questo report fornisce un riepilogo delle valutazioni, incluse quelle dentali, ortodontiche, parodontali e restaurative, insieme a una stima dei costi presentata sotto forma di punteggi.

Verranno inoltre incluse le anomalie dentali rilevate dall'AI.

Tieni presente che tutti i report sono disponibili per il download in formato PDF (vedi freccia rossa).

Dental Evaluation

Dental Evaluation



Evaluation Summary

Patient Name:

Evaluation Name:

Evaluation Date:
12 Jan 2025 v 1.0.0

A. Dental Evaluation:

Lower difficulty

B. Orthodontic (Tooth Alignment):

Some teeth alignment are needed (esthetic)

C. Periodontic (Gum Health):

Some dental/ oral hygiene maintenance is recommended

D. Restorative (Cavity or Fillings):

Some dental/ oral restoration is recommended (possible filling, cavities)

E. Cost Estimation:

The total cost estimation based on these assessment is 1 out of 4 (affordable)

Evaluated Image(s): 14 Image(s)

Analyzed Image(s): 1 Image(s)

Ref:

AnnieDS : AN2000014162

Assessment : TPIX-96E8F198-383F-468C-BC71-04AFDBCFA962

Score

A

1

B

1

C

1

D

1

E

1

Dental Evaluation

Dental Evaluation

Image Teeth

Show 10 entries

Search:


IMAGE TYPE

DETECTED DENTAL FINDINGS

IMAGE RESULT

DENTAL
PANORAMIC

Ortho : 0, Perio : 0, Brackets : 0, Decay : 0, Restoration : 0

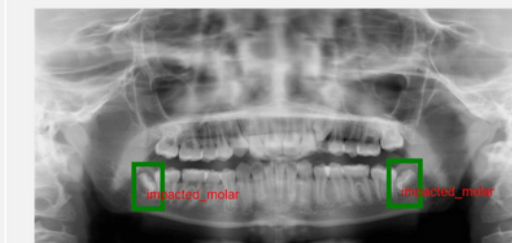

FRONTAL NO
SMILING

No Findings



Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (3)

02

Problem List

Questo report include Height Prediction, Bolton Analysis, Airway Analysis e Transverse Evaluation. Evidenzia inoltre considerazioni importanti relative alle dimensioni horizontal, vertical e di symmetry, oltre a eventuali special considerations.

Problem List

Problem List

Problem Summary

#Case:

Patient Name:

Doctor Name:
PORTAL DEMO

Birth Date:

01/01/2013 (12.03 years)

Sex/Gender:

Male

Last X-Ray Date:

01/12/2025

Prediction Detail

Height Prediction

Assumed skeletal age: 12.0

Current height: 150.0 cms

Amount of adult growth
achieved: 83.5 %

Bolton Analysis

Bolton 6 ratio: 0.907

Bolton 12 ratio: 1.058

Airway Analysis

If the patient is clinically
diagnosed as a
mouthbreather, observed
mouthbreathing is probably
not caused by adenoid
blockage of the airway.

Transverse

No data available

Problem List

Problem List

Significant Considerations

Horizontal

Class II malocclusion 1

due to the lower molar 18

Severe Overjet 5

Vertical

Deep Bite 7

Skeletal Deep Bite 15

due to the mandible &
palate 39

Symmetry

Midline Asymmetry 10

Special Consideration

Upper anterior teeth
relatively small.

Upper arch tooth mass
relatively small.

Comment

No data available

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (4)

03

Treatment Rationale (1)

Questo report fornisce la motivazione alla base della decisione relativa all'arcata inferiore, inclusi: original condition, computer decision, auxiliary appliance, post-treatment plan e lower third molar probabilities. Include inoltre i seguenti dettagli:

- Initial conditions
- Maximum permissible arch length increase (within doctor limits) due to contributing factors
- Resultant arch length discrepancy considering all possible increases (C + G)
- Final computer-generated decision
- Work-up presented is

Continue...

Treatment Rationale

Original Condition

Facial Pattern: -0.0 CD - Mesofacial

Lower Arch form: Ovoid

Lower arch length discrepancy (ALD): 1.2 mm SHORTAGE

Leeway Space: 0.0

Max use of leeway space: 0.0 mm

Total arch length discrepancy: 1.2 mm SHORTAGE

Computer Decision

UPPER ARCH: NON-EXTRACTION

Convexity Change: REDUCE 1.0 mm

LOWER ARCH: NON-EXTRACTION

Lower Incisor: FORWARD 0.3 mm

Buccal Expansion: GAIN 0.5 mm

Lower Molar: FORWARD 0.0 mm

Auxiliary Appliances

Activator: NOT INDICATED

Palate Separation: NOT INDICATED

Headgear: CERVICAL

Headgear: LIGHT FORCES

Post Treatment

Pentamorphic Arch Form: Ovoid

Arch Length Relapse: 2.3 mm

Lower third molar probabilities

Impaction: 15 %

Marginal: 43 %

Functional: 42 %

Treatment Rationale

1. Initial Conditions

A. Original Arch Length

1.2 mm shortage

B. Useable Leeway Space

0.0 mm

C. Total Initial Discrepancy(A+B)

1.2 mm shortage

2. Maximum Permissible Arch Length Increase (Within Doctor Limits) Due To

D. Lower Incisor Repositioning

4.2 mm increase

E. Buccal Expansion

0.5 mm increase

F. Lower Molar Distal Movement

0.0 mm

G. Total Possible Increase (D+E+F)

4.7 mm increase

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (5)

03

Treatment Rationale (2)

Questo report fornisce anche la Reason for Upper Arch Decision, che include:

- Convexity change
- Upper incisor tip movement for overbite/overjet ideal to lower
- First molar movement required
- First molar movement clinical limit
- Work-Up Presented Is

Treatment Rationale

REASON FOR UPPER ARCH DECISION

1. Convexity change	1.0 mm reduce
2. Upper incisor tip movement for overbite/overjet ideal to lower	5.0 mm backward
3. First molar movement required	1.5 mm backward
4. First molar movement clinical limit	5.8 mm backward
5. Work-Up Presented Is	NON-EXTRACTION

Comment

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (6)



04

Case Evaluation

Questo report fornisce Auxiliary Appliance, Probability of Lower Third Molar, inclusi lower, upper analysis e Teeth Type.

Upper Analysis	
Movement of First Molar (non-ext.) Required for Class I	1.0 mm Distal
Clinical Limit	
Resulting Expected Space for 2nd & 3rd Molars at Maturity (non-ext.)	19.6 mm
Required Space for 2nd Molars	9.0 mm to 11.0 mm
Required Space for 2nd & 3rd Molars	18.0 mm to 22.0 mm

Upper Analysis	
Upper Arch	NON-EXTRACTION
Lower Arch	NON-EXTRACTION
Lower Incisor	Forward 0.3 mm
Buccal Expansion	Gain 0.5 mm
Lower Molar Movement	Forward 0.0 mm

Case Evaluation Detail

Auxiliary Appliances

Headgear:	CERVICAL
Activator:	NOT INDICATED
Palate Separation:	NOT INDICATED
Convexity Objective:	Reduce 1.0 mm
Lower Arch Length Discrepancy (original arch), Including useable leeway (E) space::	1.2 mm Shortage

Probability of Lower Third Molar

Impaction:	15.%
Eruption Questionable Function:	43.%
Eruption Functional:	42.%

Lower Arch

LOWER ANALYSIS	REQUIRED TOOTH MOVEMENT (LT)	REQUIRED TOOTH MOVEMENT (RT)	EFFECT ON ARCH LENGTH	RESULTING DISCREPANCY
Lower Incisor to Ideal	0.2 mm Bwd.	0.4 mm Bwd.	0.8 mm Decrease	2.0 mm Shortage

Teeth Type

TEETH TYPE	L6	L5	L4	L3	L2	L1	R1	R2	R3	R4	R5	R6	TOTAL	SUM OF INCISOR	NORM
Lower Arch	11.4	8.0	7.7	7.6	6.3	5.7	5.7	6.3	7.5	7.8	7.5	11.7	93.2	24.0 MM	22.2
Upper Arch	8.9	6.7	6.9	6.4	6.8	7.9	8.1	6.4	7.5	7.2	6.3	9.0	88.1	29.2 MM	N/A

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (7)

05

Dental Findings

Questo report fornisce i dettagli della Lateral view Before treatment, inclusi:

- Dental Relations
- Dental to Skeleton
- Esthetics
- Nasopharyngeal Airway
- Frontal Before Treatment

Includi anche la frontal view before treatment, che comprende:

- Dental Relations
- Dental to Skeleton

Dental Cephalometric Finding

Dental Cephalometric Finding

Lateral Before Treatment

Dental Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
01 Molar Relation	1.0 mm	-3.0 mm	1.5	*
03 Canine Relation	0.9 mm	-2.0 mm	1.4	*
05 Incisor Overjet	10.5 mm	2.5 mm	3.2	***
07 Incisor Overbite	5.9 mm	2.5 mm	1.7	*
09 Mand Incisor Extrusion	4.7 mm	1.2 mm	1.7	*
#11 Interincisal Angle	114.5 dg	121.0 dg	-1.1	*

Dental Cephalometric Finding

Dental Cephalometric Finding

Frontal Before Treatment

Dental Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
02 Molar Relation Left (A6-B6)	0.9 mm	0.0 mm	0.5	
04 Molar Relation Right (A6-B6)	-0.2 mm	0.0 mm	-0.1	
#06 Intermolar Width (B6-B6)	56.6 mm	64.0 mm	-3.7	***
08 Inter canine Width (B3-B3)	26.5 mm	29.1 mm	-1.1	*
#10 Denture Midline	-2.1 mm	0.0 mm	-1.4	*

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (8)

06

Skeletal Findings

Questo report mostra i dettagli skeletal cephalometric dalla lateral view before treatment, inclusi skeletal relations, jaw-to-cranium position e internal structure.

Include anche la stessa analisi dalla frontal view.

Sono disponibili anche le immagini del Tracing Set.

Skeletal Cephalometric

Skeletal Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
#13 Convexity	7.2 mm	6.1 mm	0.4	
#15 Lower Facial Height	39.1 dg	48.0 dg	-2.2	**
84 Present Patient Height	150.0 cm	147.7 cm		
91 Posterior face height	78.9 mm			
92 Anterior face height	118.9 mm			
93 Posterior/Anterior ratio	66.3 %			
94 Saddle Angle	130.1 dg	123.0 dg	2.4	**
96 Condylion-A point	95.7 mm	90.4 mm	1.5	*

Skeletal Cephalometric

Frontal Before Treatment

Skeletal Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
#14 Max-Mand Width Left	-13.8 mm	-11.8 mm	-0.7	
#16 MaxiMand Width Right	-11.5 mm	-11.8 mm	0.1	
17 MaxiMand Midline	-0.3 dg	0.0 dg	-0.1	

Jaw to Cranium

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
--------	----------------	---------------	----------------	----------------

Skeletal Cephalometric


Tracing Set

AN2000014162

AN2000014162

VISUAL NORMS

ANN

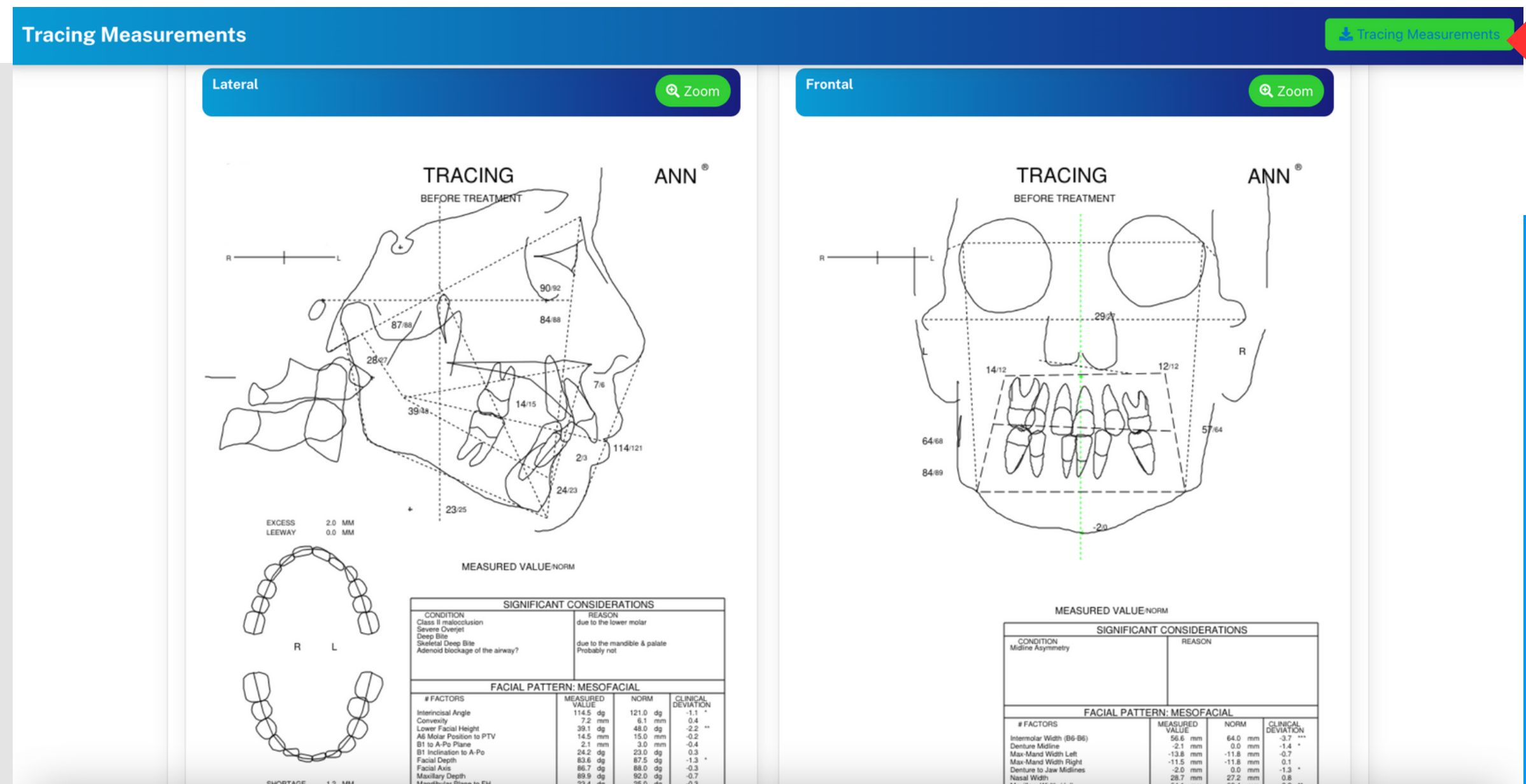

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (10)

08

Sequence Worksheet (1)

- Il Sequence Worksheet fornisce un report suddiviso in tre sezioni: Narrative, Letter e Treatment Plan Diagram Chart.
- La sezione 'Narrative' riassume la sequenza del trattamento per entrambe le arcate, superiore e inferiore, descrivendo le attività previste per ciascun mese. Include anche una letter indirizzata al paziente.
- La sezione 'Letter' offre un riepilogo del trattamento destinato al medico.

Continue...

Sequence Worksheet

Narrative (This output might take some time to produce, please check regularly)

English (US) Español (Mexicano) Português (Brasil)

Step-by-Step Treatment Summary for

Upper Arch Treatment Sequence:

1. **Month 1-4: Expand Arch**
 - The upper arch will be expanded. This helps to create space and improve the alignment of the teeth.
2. **Month 5-7: Correct Convexity and Distalize 6**
 - Simultaneously, we will correct the convexity (the outward curvature of your teeth) and move the molar teeth (6th teeth from the front) backwards to align properly with the rest of the teeth.
3. **Month 6-10: Intrude 1 and Retract 4 and/or 5**
 - From month 6, while continuing previous treatments, the front tooth (Incisor 1) will be moved downwards (intruded) to correct its height.
 - The canine and premolar teeth (4 and 5) will be pulled back to improve the bite and aesthetic appearance.
4. **Month 10-11: Retract 3**

Sequence Worksheet

Letter (This output might take some time to produce, please check regularly)

English (US) Español (Mexicano) Português (Brasil)

Subject: Treatment Design Review for

Dear Dr. Portal Demo,

I hope this message finds you well. After reviewing Vincent Ann's facial structure and anticipating how they might respond to dental treatment, our planned approach indicates a significant adjustment to the position of the front teeth is necessary.

We would appreciate your expertise in evaluating our treatment plan. Could you please consider whether standard dental treatments would be effective for this case? Alternatively, we have outlined a few less conventional methods that could be considered:

- Implementing mechanisms to help open the bite
- Introducing a phase of treatment using a functional appliance
- Aiming for a slightly deeper bite than usual

These methods are not typically standard, but given the unique requirements of this case, they might be worth considering. We strive to keep you informed when a case requires exceptional procedures.

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (11)


08

Sequence Worksheet (2)



Nel report è incluso anche un Treatment Plan Chart scaricabile in formato JPG. Fai clic su 'Zoom' per visualizzare un'ingrandimento del diagramma.

Nota:

- La funzione 'Letter' potrebbe non essere disponibile per alcuni casi.
- Il Sequence Worksheet NON sarà disponibile se mancano uno o più 1st molar(s) o central incisor(s).

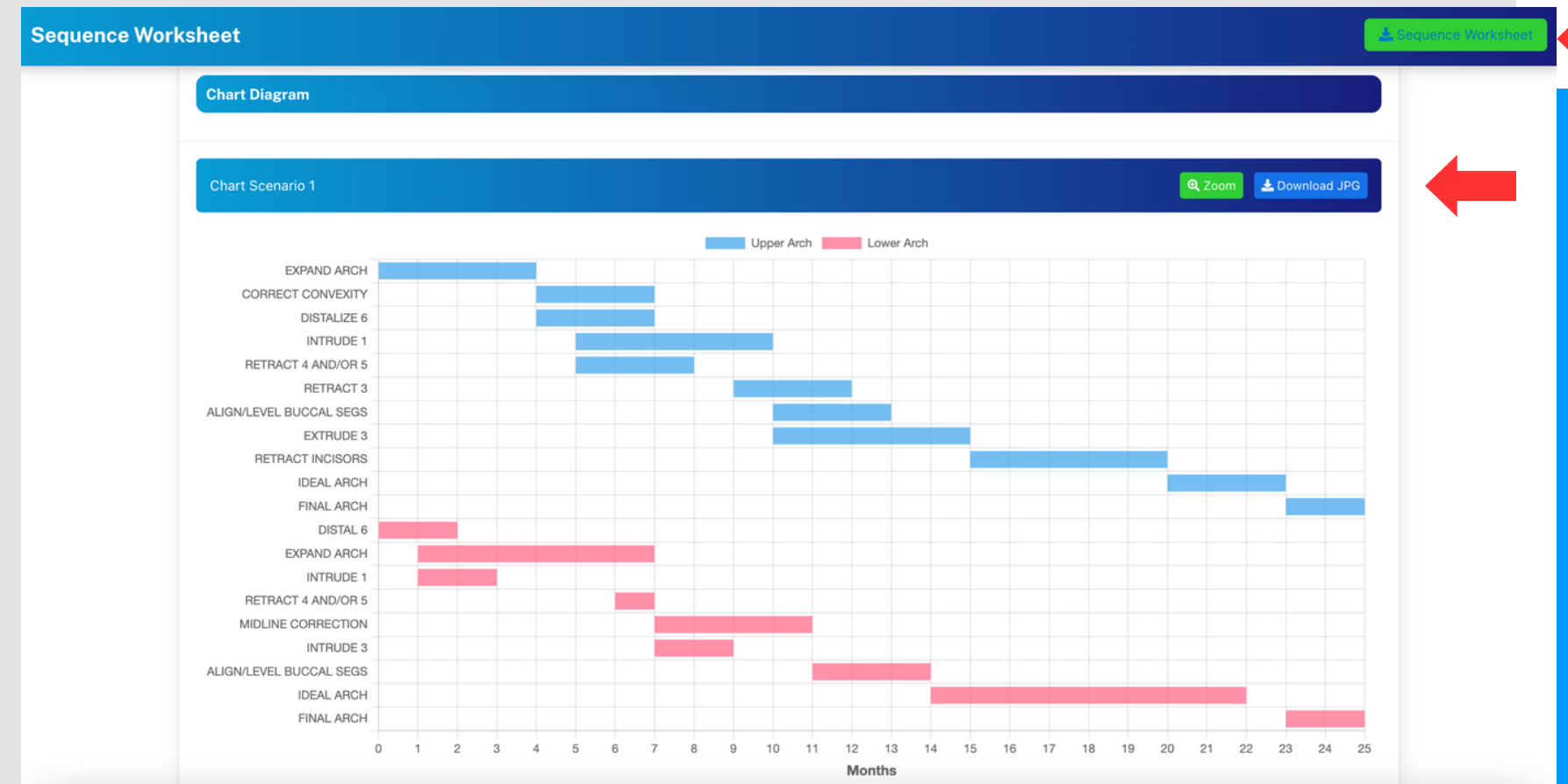

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (12)

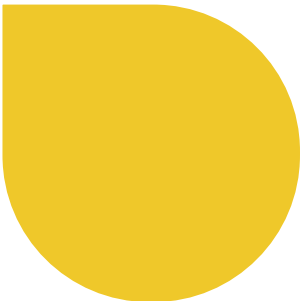
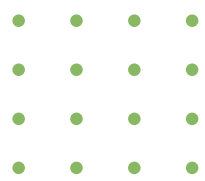


VISUAL NORMS ANN®

09

Full Comprehensive Report

Potrai scaricare un report completo in formato PDF. Contiene tutti i risultati, dal Report 1 al Report 8.

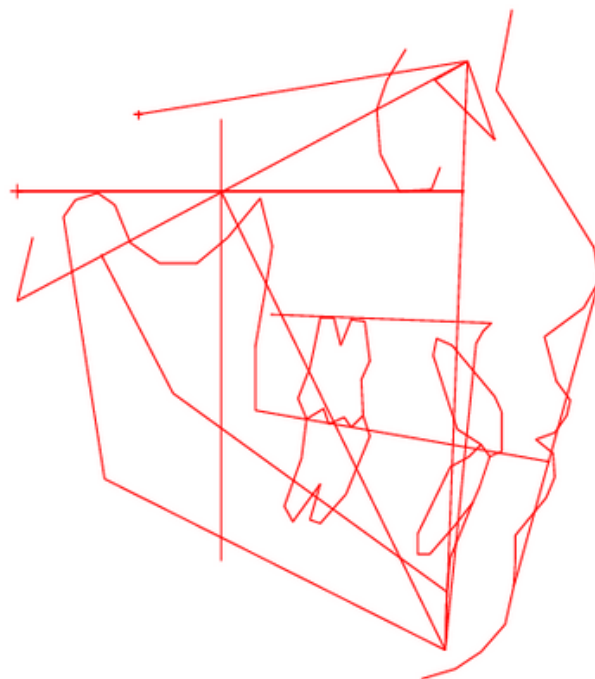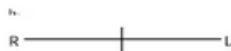

ANN

Data Services
HCDS, Inc.

*1(847)665-9458 47 W Polk St
Chicago, IL 60605

ANN Case Number: 0000 1416_2
ANN Run date: 06/17/2025

X-Ray date: 01/12/2025 Age: 12.0
Birthdate: 01/01/2013 Sex: Male 4

Reference: C C D I

CCD - ORTHODONTIC CONDITIONS

LATERAL BEFORE TREATMENT

FRONTAL BEFORE TREATMENT

FACTOR

MEASURED
VALUE

CLINICAL
NORM

CLINICAL
DEVIATIONS
FROM NORM

- Appears on tracing

FACTOR

MEASURED
VALUE

CLINICAL
NORM

CLINICAL
DEVIATIONS
FROM NORM

- Appears on tracing

DENTAL RELATIONS

DENTAL RELATIONS

01 Molar Relation	1.0 mm	-3.0 mm	1.5 *
03 Canine Relation	0.9 mm	-2.0 mm	1.4 *
05 Incisor Overjet	10.5 mm	2.5 mm	3.2 ***
07 Incisor Overbite	5.9 mm	2.5 mm	1.7 *
09 Mand Incisor Extrusion	4.7 mm	1.2 mm	1.7 *
#11 Interincisal Angle	114.5 dg	121.0 dg	-1.1 *

02 Molar Relation Left (A6-B6)	0.9 mm	0.0 mm	0.5
04 Molar Relation Right (A6-B6)	-0.2 mm	0.0 mm	-0.1
#06 Interincisor Width (B6-B5)	56.6 mm	64.0 mm	-3.7 ***
08 Interincisor Width (B3-B5)	26.5 mm	29.1 mm	-1.1 *
#10 Denture Midline	-2.1 mm	0.0 mm	-1.4 *

DENTAL TO SKELETON

DENTAL TO SKELETON

#18 A6 Molar Position to PTV	14.5 mm	15.0 mm	-0.2
#20 B1 to A-Po Plane	2.1 mm	3.0 mm	-0.4
22 A1 to A-Po Plane	13.0 mm	5.5 mm	3.4 ***
#24 B1 Inclination to A-Po	24.2 dg	23.0 dg	0.3
26 A1 Inclination to A-Po	41.3 dg	36.0 dg	1.3 *
27 Occlusal Plane to Xi	0.9 mm	-0.5 mm	0.5
28 Inclination of Occl Plane	16.0 dg	25.0 dg	-2.2 **
54 B1 Inclination to FH	49.6 dg	65.0 dg	-3.1 ***

19 B6 to J-Ag Left	6.2 mm	5.4 mm	0.4
21 B6 to J-Ag Right	9.6 mm	5.4 mm	2.1 **
#23 Denture to Jaw Midlines	-2.0 mm	0.0 mm	-1.3 *
25 Occlusal Plane Tilt	-2.2 mm	0.0 mm	-1.1 *

ESTHETICS

29 Lower Lip to Esthetic Plane	3.3 mm	2.0 mm	0.7
30 Upper Lip Length	30.5 mm	26.8 mm	1.8 *
31 Lip Embrasure to Occl Plane	-0.8 mm	-3.0 mm	1.1 *
58 Nasolabial Angle	103.0 dg	110.0 dg	-1.4 *

NASOPHARYNGEAL AIRWAY

62 N-S-Ba	133.9 dg	129.6 dg	0.9
63 Ba-S-PNS	56.3 dg	63.0 dg	-2.7
85 Airway Percent	63.0 %	58.5 %	0.3
86 Linder-Aronson AD1	22.4 mm	24.0 mm	-0.3
87 Linder-Aronson AD2	19.1 mm	19.5 mm	-0.1
88 Distance PTV to Adenoid	15.0 mm	11.7 mm	0.7

Step 12: Review The Reports / Revisione dei Report (13)

10

HLD Summary

Questo report fornisce i punti principali relativi alla Handicapping Labio-Lingual Deviation (HLD) Index Score Sheet. Mostra anche lo stato di qualificazione in base all'HLD Index.

Sono disponibili anche le linee guida e le regole per l'applicazione dell'HLD Index.

HANDICAPPING LABIO-LINGUAL DEVIATION INDEX (HLD) SCORE SHEET Handicapping

A. Conditions 1-5 Are Automatic Qualifiers

- 1 Cleft Palate YES
- 2 Deep impinging bite with signs of tissue damage, not just touching palate NO
- 3 Anterior crossbite with gingival recession NO
- 4 Severe traumatic deviation (i.e., accidents, tumors, etc. attach description) NO
- 5 Impacted Maxillary Central Incisor NO

Continue to scoring below if there are no qualifying conditions checked above

B. Conditions 6-14 Must Score 28 Points or More to Qualify

	Unit	Index	Score
6 Overjet (one upper central incisor to labial of the most labial lower incisor)	mm	x 1	11

HANDICAPPING LABIO-LINGUAL DEVIATION INDEX (HLD) SCORE SHEET Handicapping

Guidelines and Rules for Applying the HLD Index

The provider is encouraged to score the case and exclude any case that obviously would not qualify for treatment. Upon completion of the HLD Index score sheet, review all measurements and calculations for accuracy.

General Instructions

- ☒ Indicate by checkmark next to A or B which criteria you are submitting for review.
- Position the patient's teeth in centric occlusion.
- Record all measurements in the order given and round off to the nearest millimeter.
- Enter the score "0" if condition is absent.

A. Automatic Qualifiers (Conditions 1-5)


Indicate with an "X" if condition is present.

Cleft Palate
a cleft palate deformity must be demonstrated on the study model, if the deformity cannot be demonstrated on the study model, the condition must be diagnosed by properly credentialed experts and the diagnosis must be supported by documentation. If present, enter an "X".

Deep Impinging Bite
deep impinging overbite with signs of tissue damage of the palate, not just touching palate, including inflammation or damage of the gingiva palatal to the maxillary incisors. The condition must be clearly visible in the mouth and demonstrate on photos. On study models, the mandibular teeth must be clearly touching the palate and the tissue indentations or evidence of soft tissue damage or inflammation must be clearly visible. Tissue indentations without soft tissue damage do not meet the criteria. If present, enter an "X".

Tier

Tier
T1 Credit
242 pts

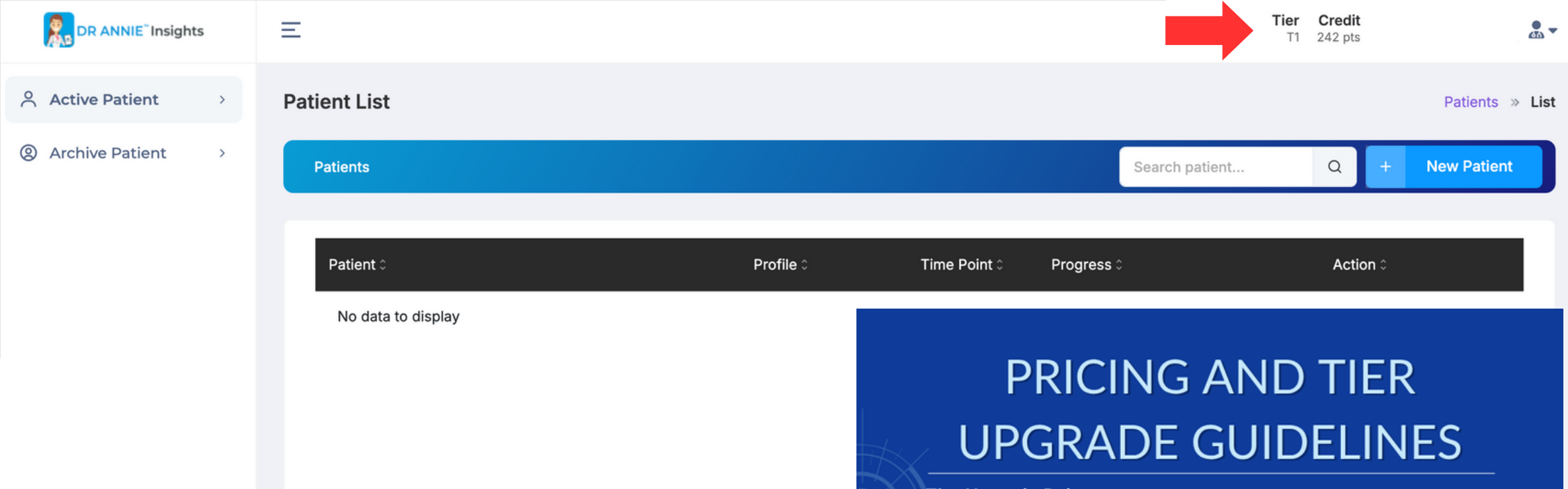

- Tier indica il tuo livello attuale sulla piattaforma DR ANNIE™ Insights e si trova nell'angolo in alto a destra (vedi freccia rossa).
- Esistono tre livelli: Tier 1, Tier 2 e Tier 3.
- Ogni tier offre un proprio set di vantaggi.
- Consulta l'immagine per i dettagli sui benefici e le linee guida per l'upgrade, oppure visita la sezione '**Pricing & Tier Guidelines**'.

PRICING AND TIER UPGRADE GUIDELINES

Tier Upgrade Rules
Topping up \$1,000 in a single transaction will automatically upgrade you by 1 tier.
Topping up \$2,000 in a single transaction will upgrade you by 2 tiers.
Tier progression is calculated on an annual basis.

To Qualify for Tier 1 in the Following Year:
You must remain in Tier 2 for a full year and generate 100–200 cases. If you do not top up and generate fewer than 100 cases, you will be downgraded to Tier 3.

To Maintain Tier 1:
You must either top up \$1,000 or generate 200+ cases annually. If you do not top up and generate fewer than 200 cases, your tier will drop to Tier 2 or Tier 3, depending on your annual case volume.

TIER 3	TIER 2	TIER 1
Standard \$10	Standard \$8	Standard \$5
Standard + \$15	Standard + \$10	Standard + \$8
Complete \$20	Complete \$15	Complete \$10
0 - 100 Report(s) Annually	100 - 200 Report(s) Annually	200+ Report(s) Annually

VIP REPORTS \$50

VIP Reports will manually reviewed and processed by experienced professionals.

Your credits will be utilized to generate reports. The more reports you generate, the lower the cost per report, as outlined in our tiered pricing structure. When your credits are depleted, you can conveniently top up through our payment gateway and apply any available discount coupons.


User Credit / Credito utente

- Fai clic sull'icona nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona 'Credits' oppure fai clic su 'Credit' nella barra superiore (vedi frecce rosse) per visualizzare il tuo saldo crediti e le statistiche.


The screenshot displays the 'User Credit' interface. In the top right corner, there is a user profile icon with a dropdown menu. The menu options are 'Credits' (highlighted with a red arrow), 'Doctor Preference', 'Manual Guide', and 'Log Out'. Above the menu, the text 'Tier T1' and 'Credit 286 pts' is visible, with a red arrow pointing to the 'Credit' text. The main content area is divided into two sections: 'Top Up' and 'Credit'. The 'Top Up' section has buttons for \$20, \$50, \$100, \$300, 1000, and 2000, along with 'BACK' and 'CHECKOUT' buttons. The 'Credit' section shows a table with the following data:

Credit	
Balance	
Credit Spend (MTD) / (YTD)	
Credit Topup (YTD)	
Paid Report (MTD) / (YTD)	2 / 8
Generated Report (MTD) / (YTD)	14 / 34

At the bottom, there are two tabs: 'Pricing & Tier Guidelines' (active) and 'Usage History'.

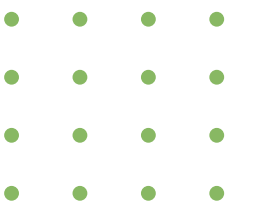

Pricing & Tier Upgrade Guidelines / Prezzi e Linee Guida per l'Aggiornamento del Livello

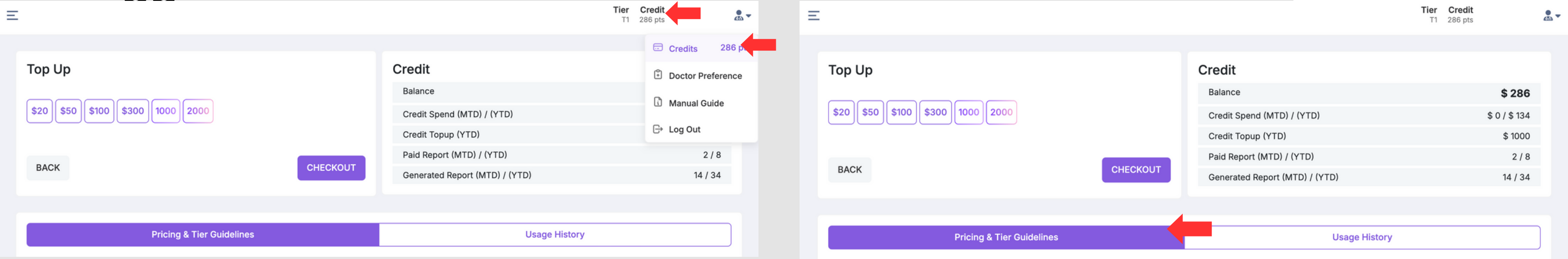

- Fai clic sull'icona nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona 'Credits' oppure fai clic su 'Credit' nella barra superiore (vedi frecce rosse).
- Successivamente, fai clic su 'Pricing & Tier Guidelines' per visualizzare il costo di ciascuna funzione e i termini per l'upgrade del tuo tier.
- Ad esempio, se sei in Tier 1, la generazione di un Standard report costerà \$5 (5 pts).
- Consulta l'immagine per le istruzioni su come effettuare l'upgrade del tuo tier e per vedere i vantaggi inclusi.
- Rigenerare lo stesso report non comporterà costi aggiuntivi né l'uso di ulteriori crediti.
- Non dimenticare di controllare eventuali promozioni o sconti stagionali disponibili per aiutarti a risparmiare crediti.

PRICING AND TIER UPGRADE GUIDELINES

Tier Upgrade Rules
Topping up \$1,000 in a single transaction will automatically upgrade you by 1 tier. Topping up \$2,000 in a single transaction will upgrade you by 2 tiers. Tier progression is calculated on an annual basis.


To Qualify for Tier 1 in the Following Year:
You must remain in Tier 2 for a full year and generate 100-200 cases. If you do not top up and generate fewer than 100 cases, you will be downgraded to Tier 3.

To Maintain Tier 1:
You must either top up \$1,000 or generate 200+ cases annually. If you do not top up and generate fewer than 200 cases, your tier will drop to Tier 2 or Tier 3, depending on your annual case volume.

TIER 3	TIER 2	TIER 1
Standard \$10	Standard \$8	Standard \$5
Standard + \$15	Standard + \$10	Standard + \$8
Complete \$20	Complete \$15	Complete \$10
0 - 100 Report(s) Annually	100 - 200 Report(s) Annually	200+ Report(s) Annually

VIP REPORTS \$50
VIP Reports will manually reviewed and processed by experienced professionals.

Your credits will be utilized to generate reports. The more reports you generate, the lower the cost per report, as outlined in our tiered pricing structure. When your credits are depleted, you can conveniently top up through our payment gateway and apply any available discount coupons.

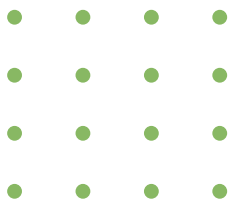

Usage History / Cronologia di Utilizzo


- Fai clic sull'icona nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona 'Credits' oppure fai clic su 'Credit' nella barra superiore (vedi frecce rosse).
- Fai clic su 'Usage History' per visualizzare la tua attività, inclusi i punti scalati per ciascuna funzione utilizzata.

The image displays two screenshots of a user interface, likely a mobile app or web portal, showing the 'Credits' and 'Usage History' sections. Red arrows indicate the navigation path.

Top Screenshot: The user is on the 'Credits' page. The top right corner shows 'Tier T1' and 'Credit 286 pts'. A red arrow points to the 'Credits' menu item in the top right corner. Another red arrow points to the 'Credits' menu item in the top right corner. The 'Usage History' tab is selected in the bottom navigation bar.

Bottom Screenshot: The user is on the 'Usage History' page. The top right corner shows 'Tier T1' and 'Credit 286 pts'. A red arrow points to the 'Usage History' tab in the bottom navigation bar. The 'Usage History' table is displayed below the tabs.

Date	Transaction	Topup	Spend
Jul 22, 2025 5:38 PM	Reporting		8
Jul 22, 2025 5:25 PM	New Case		5
Jul 15, 2025 8:02 AM	New Case		5
Jul 3, 2025 10:30 AM	Reporting		8
Jul 3, 2025 10:02 AM	New Case		5

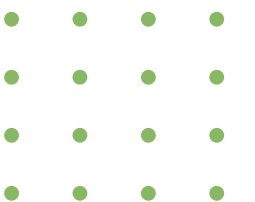


Top Up (1)


1. Fai clic sull'icona nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona 'Credits' oppure fai clic su 'Credit' nella barra superiore (vedi frecce rosse) per visualizzare il saldo e le statistiche dei tuoi crediti.
2. Fai clic sull'importo disponibile che desideri ricaricare. Poi fai clic su 'Checkout'.

Continue...

1

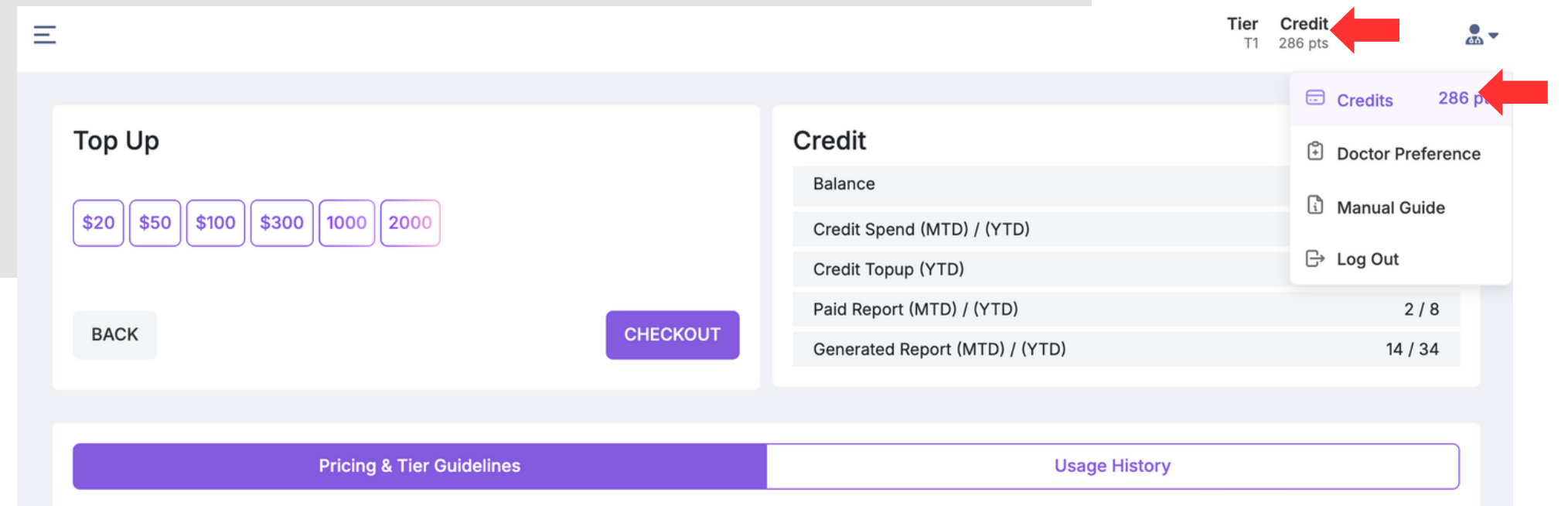

2

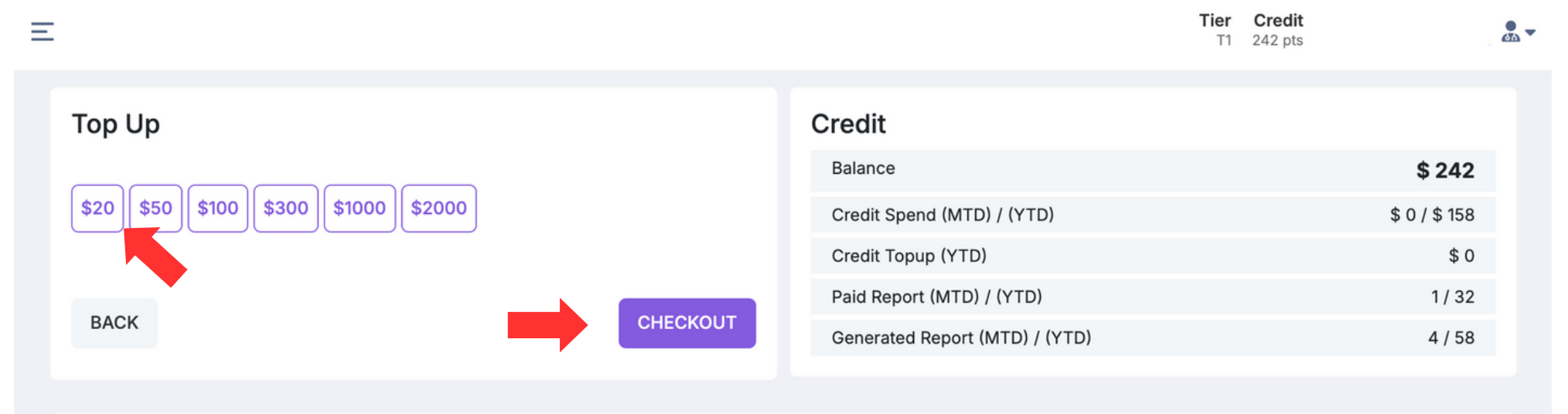

Top Up (2)

3. Apparirà la pagina di pagamento. Scegli la tua valuta preferita. Se hai un codice promozionale, puoi inserirlo e completare il pagamento (vedi freccia rossa).
4. Puoi selezionare 'Pay with Link' (pulsante verde) se hai già un account Link.
5. In alternativa, inserisci manualmente i dati della tua carta di credito. Puoi anche spuntare la casella in basso per salvare le informazioni e usare il checkout con un clic in futuro (facoltativo).
6. Fai clic su 'Pay' per completare la transazione.

The screenshot shows the payment interface for DR ANNIE Insights. It is divided into two main sections: a summary of the payment on the left and a payment method selection area on the right.

Left Section (Payment Summary):

- Header: DR ANNIE Insights
- Section: Choose a currency: (An arrow points to the \$20.00 selection).
- Text: Exchange rate and fees of your bank may apply
- Item: Payment for Annie-Insights Credit 20 points. Trx# TXN12345 (\$20.00)
- Subtotal: \$20.00 (An arrow points to the 'Add promotion code' link).
- Total due: \$20.00

Right Section (Payment Method Selection):

- Option 4: 'Pay with link' (green button, indicated by a red arrow and the number 4).
- Separator: Or
- Form 5: Card information (indicated by a red arrow and the number 5). Fields include: Email, Card number (1234 1234 1234 1234), Expiry (MM / YY), CVC, and Cardholder name (Full name on card).
- Form 6: Country or region (indicated by a red arrow and the number 6).
- Form 6: Checkbox 'Securely save my information for 1-click checkout' (indicated by a red arrow).
- Form 6: 'Pay' button (blue button, circled in red and indicated by a red arrow and the number 6).

Patient Case Search / Ricerca Casi Paziente

2

The screenshot shows the patient case management interface. At the top, there is a header bar with the patient's name "DEMO, CLASSONE", email "ismart.patient@gmail.com", and a "Case ID" "AN2001500011" which is highlighted with a red arrow. The date "January 30, 2025" and "Selected Timepoint" are also visible. Below the header, there is a progress bar with five steps: "1 Intra Oral Photos", "2 Extra Oral Photos", "3 Dental Chart", "4 X-Rays/Radiographs", and "AI - Findings". The "AI - Findings" step is currently active, indicated by a green bar. To the right of the progress bar, there is a "Reports" icon.

Search Patient Result

The screenshot shows the "Search Patient Result" interface. At the top, there is a search bar with the text "CLASSONE" and a magnifying glass icon. A red arrow points to the search bar. To the right of the search bar is a "New Patient" button. Below the search bar, there is a table with patient search results.

Patient	Profile	Time Point	Progress	Action
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	


Search Patient Result

The screenshot shows the "Search Patient Result" interface. At the top, there is a search bar with the text "AN2001500011" and a magnifying glass icon. A red arrow points to the search bar. To the right of the search bar is a "New Patient" button. Below the search bar, there is a table with patient search results.

Patient	Profile	Time Point	Progress	Action
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	

1. Puoi cercare un caso inserendo il nome del paziente o l'ID del paziente nella barra di ricerca.
2. L'ID del paziente sarà disponibile solo dopo che un report è stato generato. Consulta la freccia rossa per individuare l'ID del caso.

Se hai già inviato il caso ma il report non è ancora stato generato, puoi cercarlo usando il nome del paziente.

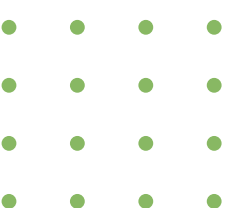

Doctor Preference / Preferenze del Medico

Tier T1 Credit 242 pts

Patient List

Patients Search patient...

Credits 242 pts

Doctor Preference

Manual Guide

Log Out

Doctor Preference

Preferred Treatment

☒ Let DR.ANNIE suggest
The user does not have a specific preference and authorizes DR. ANNIE™ to recommend the most appropriate treatment approach, whether extraction or non-extraction.

☐ Force Non-Extraction
Based on the user's selection, DR. ANNIE™ will proceed with a treatment plan that is primarily non-extraction-based, where clinically appropriate.

☐ Force Extraction
Based on the user's selection, DR. ANNIE™ will proceed with a treatment plan that is primarily extraction-based, where clinically appropriate.

BACK

Tools

☒ Braces

☐ Aligner

SAVE

- Fai clic sull'icona nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona 'Doctor Preference' (vedi frecce rosse).
- Scegli il trattamento e gli strumenti preferiti.
- Fai clic su 'Save' per applicare le modifiche.

La selezione delle Doctor Preferences influirà sui risultati dell'analisi di DR ANNIE™ e anche sui report generati.

Se desideri aggiornare i risultati dell'assessment che hanno generato il report, devi reimpostare il timepoint e rigenerare nuovamente il report.



Sample Case / Caso di Esempio

DR ANNIE™ Insights

Active Patient ▾


- A
- B
- C
- D (3) ←
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N

Patient List

Patients Search patient... Q + New Patient



Patient ▾	Profile ▾	Time Point ▾	Progress ▾	Action ▾
DEMO, CLASSTWO ismart.patient@gmail.com 0617032211	Jan 30, 2010 M 155 cm LA	1	Submitted Processed Complete	↔ 📁 🗑️
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	↔ 📁 🗑️
DEMO, CLASSTHREE ismart.patient@gmail.com 0617472535	Jan 30, 2000 F 160 cm CA	1	Submitted Processed Complete	↔ 📁 🗑️

- Per riferimento, sono disponibili tre casi demo basati sui risultati dell'assessment condotto da DR ANNIE™: Demo Class One, Demo Class Two e Demo Class Three.
- Puoi trovarli sotto la lettera "D" nella sezione Active Patient (vedi freccia rossa).

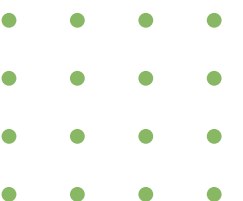

Pronto per Generare? Assicurati di Aver Completato Questi Passaggi

- Assicurati che tutte le immagini soddisfino i requisiti richiesti.
- Assicurati che tutti gli input e le verifiche necessarie siano stati completati prima di generare i report.
- Gli utenti possono anche rigenerare il report in caso di modifiche alla foto del paziente o al processo di verifica dentale.

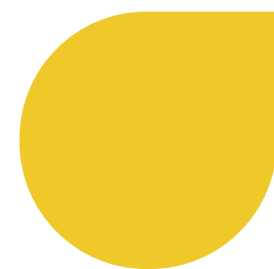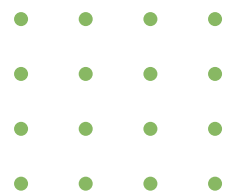

DR. ANNIETM INSIGHTS



✓ AI Dental Findings

✓ Report Generating

✓ Timepoint Feature

✓ AnnieInsight+



La tecnologia AI di DR ANNIE™ è in costante miglioramento, contribuendo a comprendere meglio i pazienti e a pianificare i trattamenti in modo più efficace.

Se hai domande, non esitare a contattarci a

✉ support@ismartdds.com

☎ +1-833-6776676 (Toll-Free)

🌐 [iSmartDDS](https://www.ismartdds.com)