

TENA PROSKIN COMFORT

Produktdatablad



Bruksområde

TENA Comfort er et svært lekkasjesikkert og komfortabelt todelt system for middels til tung inkontinens. TENA Comfort finnes i seks ulike absorpsjonsnivåer (Normal, Plus, Extra, Super, Maxi og Ultima). Riktig størrelse og kvalitet på fikseringstrusene er viktig for at produktet skal sitte godt mot kroppen.



TENA
an Essity brand

Kontakt oss for mer informasjon

☎ 22 70 62 00

tena.no

TENA PROSKIN COMFORT

Produktdatablad



Produktegenskaper

TENA Comfort er både lekkasjesikkert og komfortabelt. Doble absorberende kjerner med superabsorbenter i kombinasjon med FeelDry™-overflaten gjør at urinen spres og absorberes effektivt. Overflaten mot huden holdes tørr, hvilket legger grunnlaget for sunn hud.

Produktet har en anatomisk utforming og en unik patentert skålformet lekkasjesperre som gjør produktet mer lekkasjesikkert.

ConfioAir™ pustende materialer gir økt komfort og bedrer hudens tilstand.


TENA Comfort har Odour Neutralizer, som betyr at produktet har superabsorbenter som kapsler inn urinen, og har en nøytraliserende effekt på uønsket lukt. Produktet har våtindikator og tydelig fargemarkering til hjelp ved valg av absorpsjonsnivå.



3023 0023

TENA Comfort										
Absorpsjonsnivå/ størrelse	Svane- merket	Lengde cm	Bredde cm	Vekt g	Antall/pose stk	Antall/kart stk	Antall kart pall	Praktisk absorpsjon	ISO 11948-1 Absorpsjons- kapasitet	Essity Art.nr
Breathable Normal	✓	52	22	46	42	126	16	376	1128	759007
Breathable Plus	✓	63	27	70	46	92	16	548	1643	759008
Breathable Extra	✓	63	27	78	40	80	16	615	1844	759009
Breathable Super	✓	63	27	88	36	72	16	804	2413	759010
Breathable Maxi	✓	66	29,5	111	28	56	16	995	2985	759012
Ultima	✓	66	29,5	117	26	52	16	1154	3463	759011

Bruksanvisning

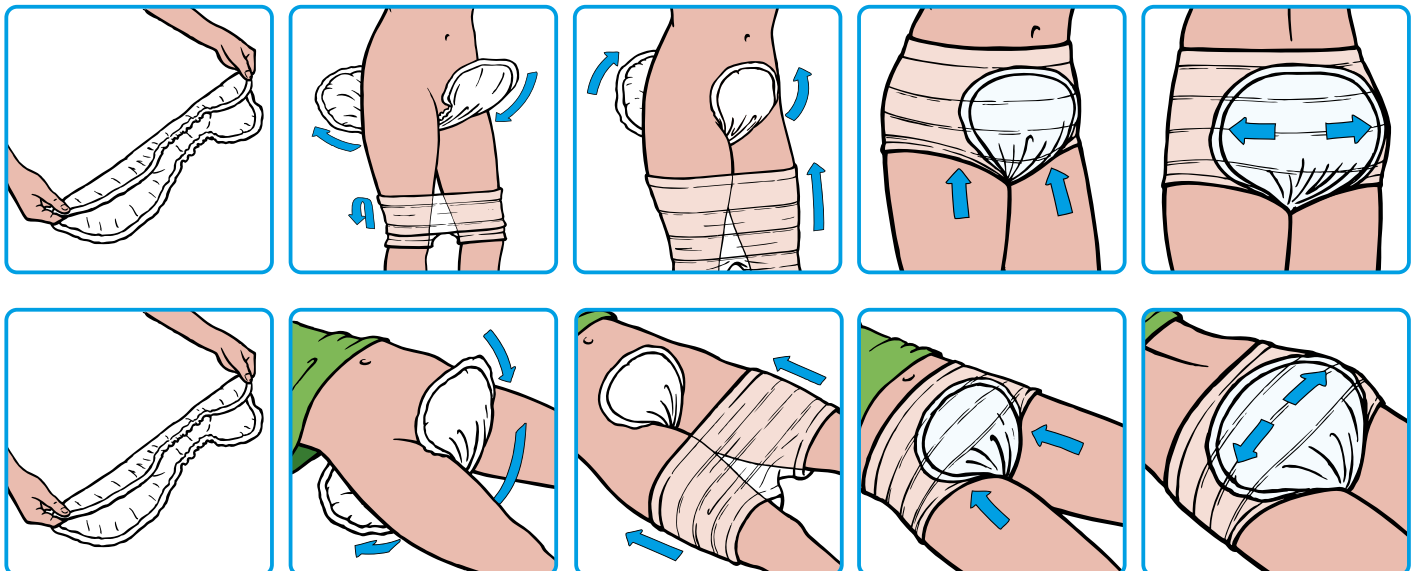

TENA PROSKIN COMFORT

Produktdatablad



Produktegenskaper

TENA Comfort er både lekkasjesikkert og komfortabelt. Doble absorberende kjerner med superabsorbenter i kombinasjon med FeelDry™-overflaten gjør at urinen spres og absorberes effektivt. Overflaten mot huden holdes tørr, hvilket legger grunnlaget for sunn hud.

Produktet har en anatomisk utforming og en unik patentert skålformet lekkasjesperre som gjør produktet mer lekkasjesikkert.

ConfioAir™ pustende materialer gir økt komfort og bedrer hudens tilstand.


TENA Comfort har Odour Neutralizer, som betyr at produktet har superabsorbenter som kapsler inn urin, og har en nøytraliserende effekt på uønsket lukt. Produktet har våtindikator og tydelig fargemarkering til hjelp ved valg av absorpsjonsnivå.



3023 0023

TENA Comfort										
Absorpsjonsnivå/ størrelse	Svane- merket	Lengde cm	Bredde cm	Vekt g	Antall pose/kart	Absorpsjons- evne	Fargekode	Godkjent Helfo	NAF-nr	Essity Art.nr
Normal	✓	52	22	46	42/126			Ja	932365	752742
Plus	✓	63	27	70	46/92			Ja	927024	752846
Extra	✓	63	27	78	40/80			Ja	869314	753040
Super	✓	63	27	88	36/72			Ja	819393	758136
Maxi	✓	66	29,5	111	28/56			Ja	862157	759128
Ultima		66	29,5	117	17/68					759205

Bruksanvisning

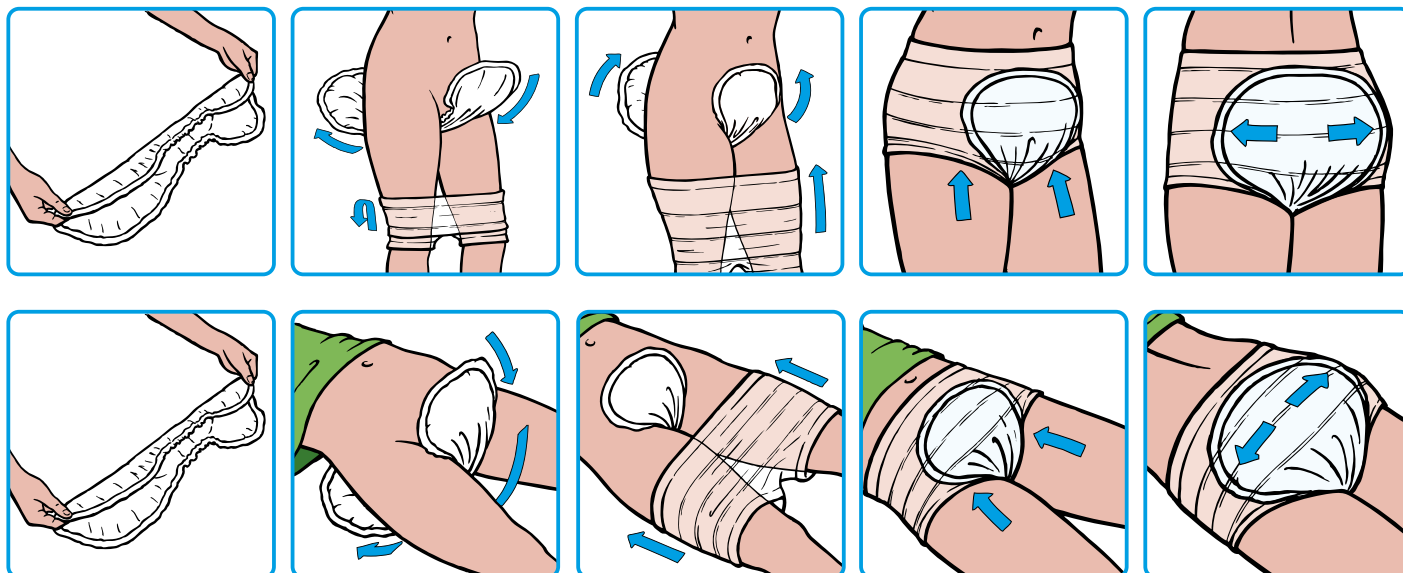

TENA PROSKIN COMFORT

Produktdatablad



Varedeklarasjon

OVERFLATE INNSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

OVERFLATE UTSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Økt komfort og diskresjon

INNSLIPP- OG SPREDNINGSMATERIALE

Materiale: Polyethylene

Funksjon: Rask absorbering og effektiv spredning av urin, hindrer urinen i å trekke tilbake til overflaten

ABSORBSJONSKJERNE, Øvre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

ABSORBSJONSKJERNE, Nedre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væsken, samt nøytralisere uønsket lukt

SPERRESJIKT

Materiale: Pustende polyeten

Funksjon: Forhindre lekkasje/gjennomvæting, tillate fuktig luft å ventileres ut fra produktet, og således bidra til komfort og et godt miljø for huden

ELASTIKK (TENA Comfort skålformet lekkasjesperre)

Materiale: Polyisopren

Funksjon: Bygge skålfasongen og forhindre lekkasje

TENA Comfort-produkter inneholder ikke:

naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftkomponenter, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter produksjonsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske, og de er CE-merkede.



TENA
an Essity brand

Kontakt oss for mer informasjon

22 70 62 00

tena.no