

# Produktdatablad TENA ProSkin Flex

## Bruksområde

TENA Flex er en særdeles lekkasjesikker og behagelig beltebleie, spesielt for brukere som trenger hjelp til skift. Den finnes i fire absorpsjonsnivåer og i fire størrelser : Small, Medium, Large og X-Large, hvilket muliggjør individuell tilpasning.



Unikt elastisk belte, ComfiStretch, som ekspanderer og går tilbake i forhold til kroppens form ved stående, sittende og liggende posisjon

Unik belteforlenger for optimal passform

LekkasjebARRIERER for høy sikkerhet

Midjeelastikk foran gir høy elastisitet og en sikker passform

Diskret våtindikator

Høy elastikk i ryggen for optimal passform i korsryggen

Hoftebeltet er stabilt og mykt, det ruller ikke ned, men sitter behagelig ved bruk

Overflaten har FeelDry™-teknologi som raskt kapsler inn urin og holder huden tørr


Enkel å feste  
Fikses med borrelås direkte på beltet.  
Kan justeres og lukkes flere ganger

Bruksanvisning på pakken forenkler påsettingen for pleiepersonalet



Odour Neutralizer for nøytraliserende effekt på uønsket lukt





Takket være den symmetrisk formede kjernen absorberer TENA Flex like bra på begge sider. Dette gjør at den kan settes på både bak- og forfra, hvilket gir en ergonomisk arbeidsstilling for pleiepersonalet og økt verdighet for brukeren

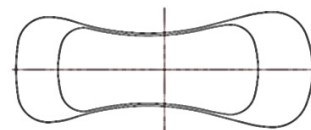






# Produktdatablad TENA ProSkin Flex

## Bruksanvisning



### Stående forfra

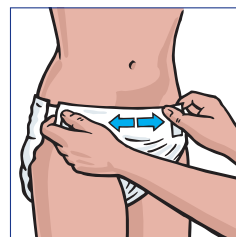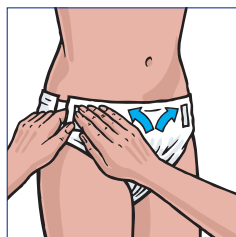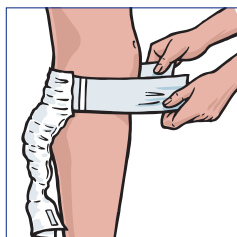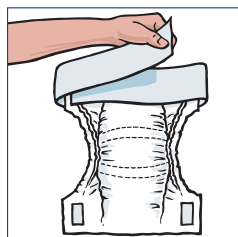

### Stående bakfra

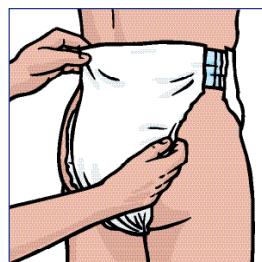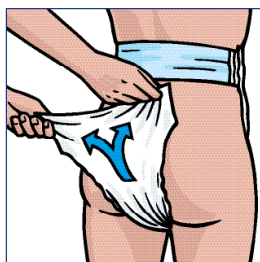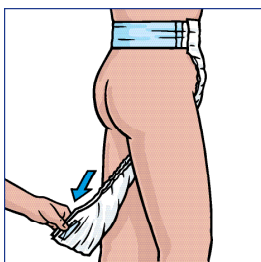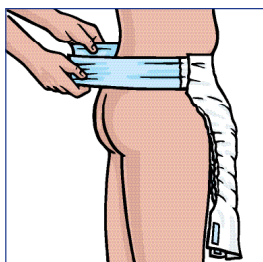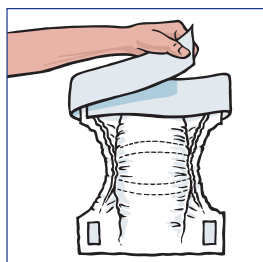

### Liggende

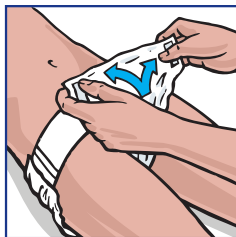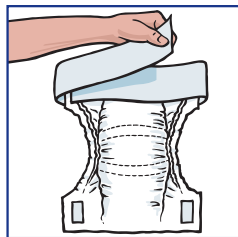

<sup>1</sup> TENA Flex i størrelse XL har en ekstra borrelås i stedet for midjeelastikk foran, gir ekstra sikker passform

NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Absorpsjons- evne	Livvidde	Fargekode	Antall Pose/Kart.	Godkjent Helfo	Svane- merket
903953	730438	TENA Flex <b>Plus</b> Small	👉👉👉	60-85 cm		30/90	Ja	Ja
921618	730431	TENA Flex <b>Plus</b> Medium	👉👉👉	70-105 cm		30/90	Ja	Ja
913716	728599	TENA Flex <b>Plus</b> Large	👉👉👉	80-125 cm		30/90	Ja	Ja
	724960	TENA Flex <b>Plus</b> X-Large	👉👉👉	105-155 cm		30/90		Ja
839686	730440	TENA Flex <b>Super</b> Small	👉👉👉	60-85 cm		30/90	Ja	Ja
816980	730456	TENA Flex <b>Super</b> Medium	👉👉👉	70-105 cm		30/90	Ja	Ja
899263	728695	TENA Flex <b>Super</b> Large	👉👉👉	80-125 cm		30/90	Ja	Ja
868296	724970	TENA Flex <b>Super</b> X-Large	👉👉👉	105-155 cm		30/90	Ja	Ja
922950	730447	TENA Flex <b>Maxi</b> Small	👉👉👉	60-85 cm		22/66	Ja	Ja
898868	730433	TENA Flex <b>Maxi</b> Medium	👉👉👉	70-105 cm		22/66	Ja	Ja
867956	729620	TENA Flex <b>Maxi</b> Large	👉👉👉	80-125 cm		22/66	Ja	Ja
921675	728533	TENA Flex <b>Maxi</b> X-Large	👉👉👉	105-155 cm		21/63	Ja	Ja
	730455	TENA Flex <b>Ultima</b> Small	👉👉👉	60-85 cm		20/60		Ja
	730436	TENA Flex <b>Ultima</b> Medium	👉👉👉	70-105 cm		20/60		Ja
	729909	TENA Flex <b>Ultima</b> Large	👉👉👉	80-125 cm		20/60		Ja
	728534	TENA Flex <b>Ultima</b> X-Large	👉👉👉	105-155 cm		17/51		Ja
	720524	TENA Flex belteforlenger		29 cm		10/120		

# Produktdatablad TENA ProSkin Flex



3023 0023

## TENA Flex

Absorpsjonsnivå/ størrelse	Svane- merket	Livvidde cm	Lengde cm	Vekt g	Lår cm	Antall/pose stk	Antall/kart stk	Antall.kart halvpall	Praktisk abs	ISO 11948-1 Absorpsjons- kapasitet	Essity Art.nr
Plus											
Small	✓	60-90	71	70	< 72	30	90	16	519	1557	730438
Medium	✓	70-105	80	81	< 84	30	90	16	595	1785	730431
Large	✓	85-120	86	95	< 99	30	90	16	699	2096	728599
X-large	✓	105-155	103	120	< 116	30	90	12	754	2261	724960
Super											
Small	✓	60-90	71	83	< 72	30	90	16	647	1942	730440
Medium	✓	70-105	80	93	< 84	30	90	16	750	2250	730456
Large	✓	85-120	86	103	< 99	30	90	16	797	2392	728695
X-large	✓	105-155	103	140	< 116	30	90	12	979	2936	724970
Maxi											
Small	✓	60-90	71	112	< 72	22	66	16	924	2771	730447
Medium	✓	70-105	80	120	< 84	22	66	16	1008	3025	730433
Large	✓	85-120	86	143	< 99	22	66	16	1191	3573	729620
X-large	✓	105-155	103	193	< 116	21	63	12	1521	4564	728533
Ultima											
Small	✓	60-90	71	127	< 72	20	60	16	1067	3202	730455
Medium	✓	70-105	80	144	< 84	20	60	16	1195	3586	730436
Large	✓	85-120	86	170	< 99	20	60	16	1422	4265	729909
X-large	✓	105-155	103	219	< 116	17	15	12	1704	5112	728534
TENA Flex Belteforlenger			29	2,5	-	10	120	168			720524

# Produktdatablad TENA ProSkin Flex

## Varedeklarasjon

### OVERFLATE INNSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

### OVERFLATE UTSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Økt komfort og diskresjon

### INSLIPP- OG SPREDNINGSMATERIALE

Materiale: Polyethylene, High loft nonwoven

Funksjon: Rask absorbering og effektiv spredning av urin, hindrer urinen i å trekke tilbake til overflaten

### ABSORBSJONSKJERNE, Øvre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

### ABSORBSJONSKJERNE, Nedre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

### SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væsken, samt til en viss grad nøytralisere uønsket lukt

### SPERRESJIKT

Materiale: Polyeten som puster

Funksjon: Forhindre lekkasje/gjennomvætning, tillate fuktig luft å ventileres ut fra produktet, og således bidra til et godt miljø for huden og komfort

### HOFTEBELTE

Materiale: Non-woven

Funksjon: Fikseringsoverflate for borrelåser på produktet, mykt for huden, pustende

### ELASTIKK I HOFTEBELTET

Materiale: SBS og Non-woven

Funksjon: Følge kroppens bevegelser og holde produktet på plass, komfort

### MIDJEELASTIKK

Materiale: Polyeten og SBS

Funksjon: Holde produktet på plass, komfort

### BENELASTIKK

Materiale: Syntetiske polyeter-polyuretantråder (Spandex)

Funksjon: Komfort og forhindre lekkasje

### BARRIERELASTIKK

Materiale: Elastan

Funksjon: Forhindre sidelekkasje av urin og avføring

For samtlige TENA Flex-produkter gjelder at følgende materialer /ingredienser ikke har blitt benyttet: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftemner, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter tilvirkningsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske produkter, og er CE-merkede.

## Kontakt oss for mer informasjon

☎ 22 70 62 00

tena.no



**essity**

TENA  
an Essity brand

