

Mepitel® One


Skånsomt
sårkontaktlag

Perforert struktur

- Transparentt sårkontaktlag gjør det mulig å vurdere såret uten å fjerne det¹
- Kan brukes i kombinasjon med geler²
- Lar sårvæsken passere til en absorberende sekundærbandasje

Safetac-laget

- Minimerer smerter og skade på huden^{1,3}

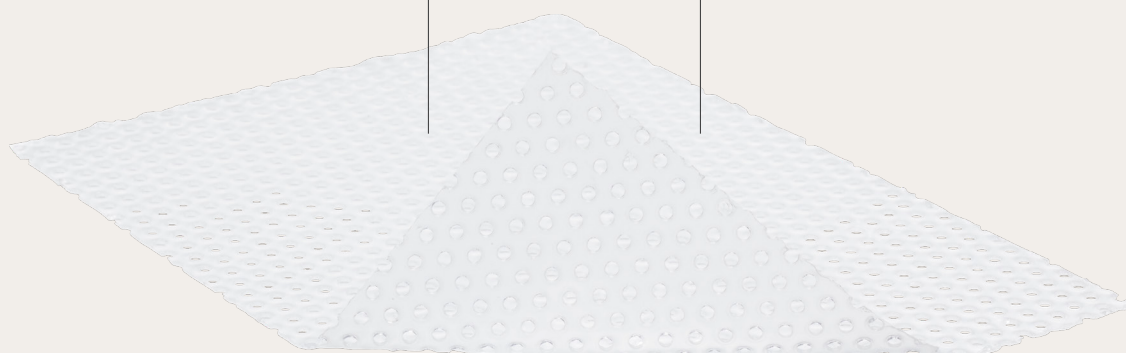

Safetac
TECHNOLOGY

Mepitel One


- Minimerer smerte og skade ved bandasjeskift^{1,3}
- Lar sårvæske passere til en absorberende sekundærbandasje og minimerer risikoen for maserasjon^{1,3}
- Kan sitte på i opptil 14 dager⁴
- Støtter uforstyrret sårheling^{1,3,4,5}

Safetac-teknologi. Mindre skade, mindre smerte

I flere randomiserte studier er bandasjer med Safetac klinisk bevist å minimere skade på såret og huden ved fjerning. Ved å forsegle sårkantene bidrar de til å forhindre maserasjon. Med mindre skade på såret og huden reduseres smerte ved bandasjeskift. Derfor assosierer flere randomiserte studier bandasjer med Safetac med raskere tilheling og lavere totale behandlingskostnader.

Les mer på:
<https://www.molnlycke.no/var-kunnskap/safetac-technology/>


Hvordan bruke Mepitel One

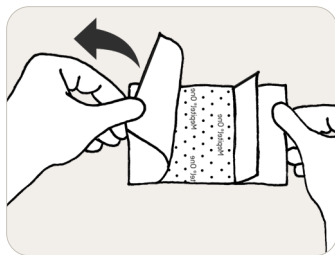


1. Rengjør såret i henhold til klinisk praksis og tørk omkringliggende hud nøye.



2. Velg en størrelse Mepitel One som dekker såret og omkringliggende hud med minst to cm. Bandasjen kan klippes ved behov. Beregn større overlappning til omkringliggende hud ved større sår.

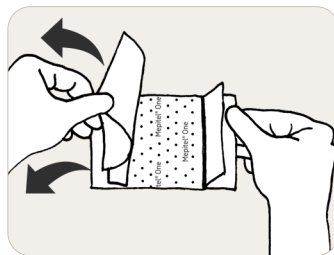

3. Fjern beskyttelsesfilmen og legg Mepitel One med den klebrige siden mot såret. Bandasjen er lagt riktig om du kan lese den trykte teksten. Glatt bandasjen på plass på omkringliggende hud for å oppnå en god forsegling. Om flere Mepitel One brukes, overlapp disse og sørg for at hullene ikke blokkeres..

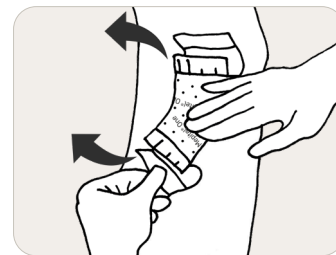

4. Legg på en absorberende bandasje over Mepitel One, og fiksér.

Slik fungerer Mepitel One

Mepitel® One kan ligge på i opptil 14 dager, avhengig av sårets tilstand, noe som reduserer behovet for hyppige skift av primærbandasje. Den åpne strukturen gjør at sår væsken slipper gjennom til en absorberende sekundærbandasje.

Safetac®-laget hindrer sekundærbandasjen i å sitte fast i såret og sikrer atraumatiske bandasjeskift. Safetac skaper en barriere rundt sårkantene og hindrer lekkasje til omkringliggende hud, noe som minimerer risikoen for maserasjon.

Bruksområder

Mepitel One er et sårkontaktlag til bruk på en rekke væskende sår som hudflenger, hudavskrapninger, kirurgiske snitt, delhudsbrannskader, traumatiske sår, del- eller fullhudstransplantater, stråleskadet hud og legg- og fotsår. Det kan også brukes som et beskyttende lag på ikke-væskende sår, blødder og skjør hud.

Mepitel One sortiment (sterile enhetspakninger)

Art. nr.	Størrelse cm	Antall i eske	Antall i kartong
289100	5 x 7,5	10	70
289300	7,5 x 10	10	40
289500	10 x 18	10	70
289700	17 x 25	5	40
289750	27,5 x 50	2	14
289170*	6 x 7	5	70
289270*	9 x 10	5	50
289470*	13 x 15	5	50

*Spesielt tilpasset bruk på hudflenger med påtrykt pil for fjerning i riktig retning.

Forholdsregler

- Ved tegn til infeksjon, som feber eller at såret eller omkringliggende hud er rødt, varmt eller hovent, rådfør helsepersonell for videre behandling.
- Rådfør alltid helsepersonell før Mepitel One brukes på pasienter med epidermolysis bullosa.
- Hvis Mepitel One benyttes ved delhudsbrannskader med høy risiko for rask granulering eller etter ansiktsoperasjoner, bør en unngå å plassere for mye press på bandasjen. Løft og reposisjoner bandasjen minimum annenhver dag.
- Når Mepitel One brukes til fiksering av hudtransplantater og beskyttelse av blødder, bør ikke bandasjen skiftes før etter fem dager.
- Bruk ikke Mepitel One på pasienter med kjent overfølsomhet for silikon eller polyuretan.
- Må ikke gjenbrukes. Flergangsbruk kan svekke produktets egenskaper, og krysskontaminering kan oppstå.
- Sterilt produkt. Må ikke brukes om den innerste emballasjen er ødelagt eller åpnet. Kan ikke re-steriliseres.



1. David F. et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrgoTul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2018. 2. Adamietz I.A. et al.. Effect of self-adhesive, silicone-coated polyamide net dressing on irradiated human skin. Radiation Oncology Investigations, 1994. 3. Patton P. et al. An open, prospective, randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs bridal veil and staples on split thickness skin grafts as a primary dressing. Journal of Burn Care and Research, 2013. 4. Collin O. Use of Mepitel One dressing following hand surgery: A case study series. Poster presentation at Wounds UK, Harrogate, 2009. 5. Edwards J. et al. Hand burn management: Minimising pain and trauma at dressing change. British Journal of Nursing, 2013

Les mer på molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70. The Mölnlycke, Mepitel and Safetac trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2025 Mölnlycke Health Care. All rights reserved. NOWC2082503