



PROPRIO FOOT[®]

Porque la tierra no es plana





60% MÁS RÁPIDA
adaptación al terreno¹

44% AUMENTO
en la potencia máxima
del tobillo¹

23% AUMENTO
en el rango de
movimiento¹

70% MENOS
caídas²

Jon DeChambeau es un ex golfista profesional y padre de Bryson DeChambeau, también golfista profesional.

Jon ha presentado diversas complicaciones físicas debido a la diabetes, entre ellas, discapacidad visual, un trasplante de riñón, la amputación parcial de su pie derecho (para lo cual usa una prótesis de tobillo y pie personalizada) y, más recientemente, la amputación completa de su pierna izquierda por debajo de la rodilla. El Proprio Foot brinda la seguridad, la estabilidad y la dinámica que Jon necesita para realizar las actividades que disfruta.

PROPRIO FOOT®

Porque la tierra no es plana

El primer tobillo del mundo con microprocesador (MPA). En 2006, presentamos el Proprio Foot original. Con la flexión motorizada del tobillo, el objetivo era simple: disminuir los tropiezos y las caídas. Fue un éxito con el que obtuvimos el prestigioso premio de diseño Red Dot e iniciamos una categoría totalmente nueva de productos. Sin embargo, dado que nuestro objetivo final es replicar la función del pie humano, siempre hay espacio para mejorar.

Presentamos el nuevo Proprio Foot. Al rediseñar el Proprio Foot, primero mejoramos las características de seguridad y estabilidad que, en primer lugar, hicieron tan bueno el original para los usuarios con niveles de actividad bajos a moderados. A continuación, incorporamos un módulo de pie Pro-Flex LP para brindar un 44 % más de impulso en la punta. Y si a todo eso le añadimos facilidad de uso, como la funcionalidad de un solo botón y una batería integrada, hemos dado un paso gigante para alcanzar nuestro objetivo.

LA MEJOR VERSIÓN DEL PROPRIO FOOT HASTA AHORA



La seguridad primero.

El nuevo Proprio Foot se adapta a los diversos tipos de suelo 60 % más rápido que el modelo anterior, lo que ayuda a los usuarios a caminar con naturalidad y más comodidad en los terrenos que deben enfrentar todos los días, incluidas escaleras y rampas. Ofrece 4° de dorsiflexión activa en la fase de balanceo, lo que contribuye a disminuir las caídas en un 70 %.

Las ventajas de Pro-Flex.

El nuevo Proprio Foot está construido sobre la base del Pro-Flex LP. Gracias a eso, ofrece un aumento del 44 % en la potencia del impulso en el despegue del antepié y un aumento del 23 % en el rango de movimiento (del pie de fibra de carbono subyacente) en relación con el modelo anterior. También proporciona una menor carga en el lado sano³.



“Con el pie que uso, suelo tropezar entre una y tres veces al día, pero nunca he tropezado con el Proprio Foot”

Comentario de un usuario en una investigación clínica



¡Es tan sencillo!

La configuración automática permite personalizar fácilmente el Proprio Foot para la marcha única de cada usuario. Además, el nuevo Proprio Foot presenta un nuevo y elegante diseño con una batería integrada que brinda de 18 a 36 horas de uso. Un solo botón que permite ver fácilmente el nivel de carga de la batería y alinear el tobillo para diferentes tipos de calzado con hasta 5 cm de altura del talón.

¿Olvidó el paraguas?

¡No hay problema!

No se preocupe si lo atrapa la lluvia o lo salpican los rociadores, ya que el Proprio Foot es resistente a la intemperie y es apropiado para usarlo en ambientes húmedos o con agua.

NOTA: No sumergir ni exponer a agua salada o clorada.




ÖSSUR LOGIC ACABA DE INCORPORAR UNA ACTUALIZACIÓN DE PRIMER NIVEL

El nuevo Proprio Foot incluye una actualización de la aplicación Össur Logic, que permite a los profesionales configurar fácilmente el Proprio Foot, ajustar sus funciones para cada usuario y acceder a valiosos informes de actividad.

Una nueva interfaz de usuario mejorada permite revisar rápidamente la carga de la batería y el conteo de pasos, además de ajustar la alineación del tobillo para adaptarse a diversos tipos de calzado (hasta 5 cm de altura del talón).

NOTA: La app Össur Logic está disponible para los dispositivos iOS (iOS 10.0 o posterior) y se conecta mediante Bluetooth. Puede descargarse de forma gratuita desde la App Store.

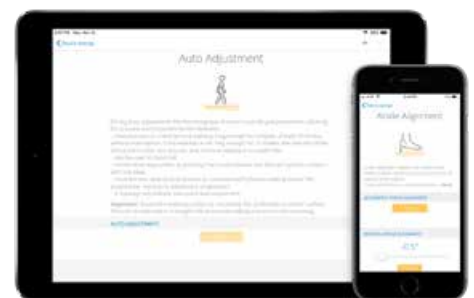

1. En comparación con la versión anterior del Proprio Foot. Datos archivados en Össur.

2. En comparación con un pie de retorno y almacenamiento de energía tradicional (ESAR). Ludviksdottir A, Gruben K, Gunnsteinsson K, Ingvarsson Th, Nicholls M. Effects on user mobility and safety when changing from a carbon fiber prosthetic foot to a bionic prosthetic foot. Presentado en el Congreso de Ortopedia y técnicas de rehabilitación, Leipzig, mayo de 2012.

3. Datos de archivo de Össur

EL NUEVO PROPRIO FOOT



INDICACIONES

- Amputaciones transtibiales y transfemorales
- Nivel de impacto bajo a moderado
- Peso máximo del usuario: 125 kg

OPCIONES

- Disponible en tamaños 22-30, categorías 1-8
- Unity disponible en tamaños 25-30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Altura de montaje: 22-24 174 mm
25-27 180 mm
28-30 188 mm
- Peso del dispositivo: 1,5 kg incl. funda cosmética

OPCIONES DE KIT

- PSX01XYZ Proprio Foot con funda cosmética, 2 años de garantía
- PSXU1XYZ Proprio Foot con Unity y funda cosmética, 2 años de garantía
X: categoría 1-9, YY: tamaño del pie (22-30), Z: lado izquierdo (L) o derecho (R)
- Para funda cosmética de color marrón, agregue el sufijo "BR" al número de referencia.
- Póngase en contacto con su representante de Össur para obtener los números de las piezas Unity.
- Se ofrecen extensiones de garantía adicionales hasta un máximo de 5 años.

OPCIONES DE ACCESORIOS

- PRX00421 - Kit de fuente de alimentación
 - FSF0SYZZ - FSF - Kit de funda cosmética
 - FST0SYZZ - FST - Kit de funda cosmética
- Todos los kits incluyen: funda cosmética extraíble con calcetín Spectra negro
- Se ofrecen extensiones de garantía adicionales hasta un máximo de 5 años.

GUÍA DE SELECCIÓN DE CATEGORÍA

| Peso kg | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 | 101-116 | 117-125 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Nivel de impacto bajo | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nivel de impacto moderado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

TABLA DE SELECCIÓN DE OPCIONES DISPONIBLES

| Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|--|--|---|---|---|-----|---|---|
| Tamaño 22-24 | Funda cosmética FSF (Sin Unity disponible) | | | | | N/D | | |
| Tamaño 25-27 | Funda cosmética FST (Unity disponible) | | | | | | | |
| Tamaño 28-30 | N/D | Funda cosmética FST (Unity disponible) | | | | | | |