



# PROPRIO FOOT<sup>®</sup>

Porque a terra não é plana





**60%** ADAPTAÇÃO  
mais rápida ao terreno

**44%** AUMENTO  
da potência máxima do tornozelo<sup>1</sup>

**23%** AUMENTO  
da amplitude de movimento<sup>1</sup>

**70%** REDUÇÃO  
das quedas<sup>2</sup>

*Jon Dechambeau é ex-golfista profissional e pai do jogador profissional de golf; Bryson DeChambeau.*

*Jon sofreu uma série de complicações físicas devido à diabetes, incluindo a deficiência visual, um transplante renal, a amputação parcial do pé direito (para o qual usa uma prótese personalizada de tornozelo e pé) e, recentemente, a amputação total do pé esquerdo, abaixo do joelho. O Proprio Foot proporciona a segurança, estabilidade e dinâmica de que Jon precisa para fazer as atividades de que mais gosta.*

# PROPRIO FOOT®

Porque a terra não é plana

## O primeiro tornozelo do mundo com microprocessador (MPA).

Em 2006, lançamos o Proprio Foot original. Com a flexão motorizada do tornozelo, o objetivo era simples: diminuir os tropeções e quedas. Foi um sucesso com o qual conquistamos o prestigioso prêmio de design Red Dot e iniciamos uma categoria totalmente nova de produtos. No entanto, e uma vez que nosso objetivo principal é replicar a função do pé humano, há sempre espaço para melhorias.

## Apresentamos o novo Proprio Foot.

Ao redesenhar o Proprio Foot, começamos por aperfeiçoar as características de segurança e de estabilidade que tornaram a versão original excepcional para os utilizadores com níveis de atividade baixo a moderado. De seguida, incorporamos o módulo do pé Pro-Flex LP para fornecer mais impulso na elevação dos dedos, cerca de 44%. Para além disso, melhoramos a facilidade de utilização, incluindo a funcionalidade de um único botão e uma bateria integrada, dando um passo gigante em direção ao nosso objetivo.

# A MELHOR VERSÃO DO PROPRIO FOOT ATÉ AGORA



## A Segurança em primeiro lugar.

O novo Proprio Foot adapta-se aos diversos tipos de superfície 60% mais rápido do que o modelo anterior, permitindo aos utilizadores caminhar mais natural e confortavelmente nos diferentes tipos de terreno que encontram diariamente, incluindo escadas e rampas. Oferece também 4° de dorsiflexão ativa na fase de balanço, contribuindo para a redução das quedas em 70%.



## As vantagens do Pro-Flex.

O novo Proprio Foot foi concebido sobre uma base do Pro-Flex. Como resultado e comparativamente ao modelo anterior, proporciona um aumento de 44% do impulso na elevação dos dedos do pé e um aumento de 23% na amplitude de movimento (do pé de fibra de carbono subjacente). Também reduz a carga que coloca no membro contralateral.



*“Com o pé que uso atualmente, costumo tropeçar entre uma a três vezes por dia, mas nunca tropecei com o Proprio Foot”*

Comentário de um utilizador numa investigação clínica



## É tão simples!


A configuração automática permite personalizar facilmente o Proprio Foot, adequando-o à marcha individual de cada utilizador. Para além disso, o Proprio Foot apresenta um novo e elegante design, com bateria integrada que fornece 18 a 36 horas de uso. Através de um único botão é possível consultar facilmente o nível de bateria e alinhar o tornozelo para diferentes tipos de calçado de até 5 cm de altura do calcanhar.

## Esqueceu-se do guarda-chuva?

### Não há problema!

Não se preocupe se começar a chover ou se é borrifado pelos aspersores, já que o Proprio Foot é resistente às condições climáticas e pode ser usado em locais húmidos e/ou molhados.


NOTA: Não submergir nem expor a água salgada ou clorada.

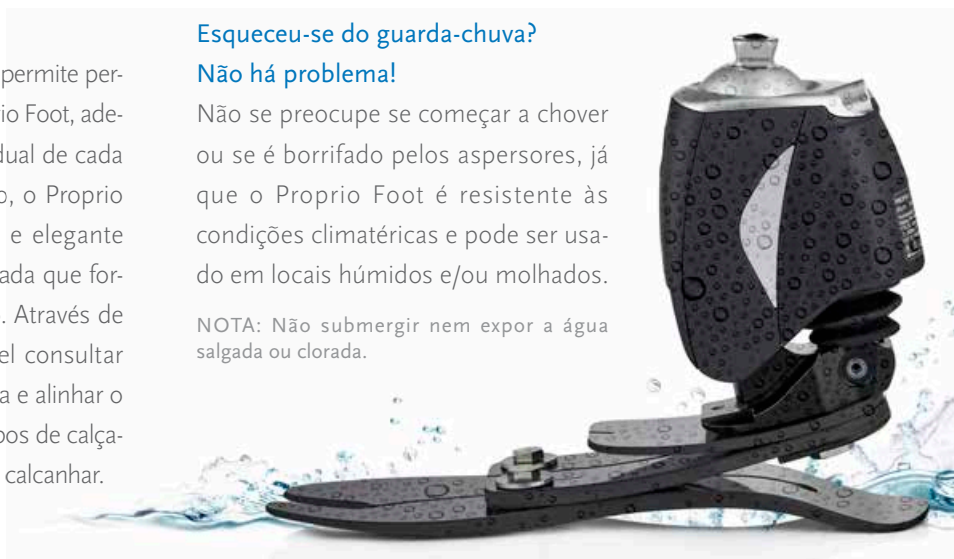

## A APP ÖSSUR LOGIC ACABA DE FAZER UMA ACTUALIZAÇÃO PREMIUM

O novo Proprio Foot inclui a APP Össur Logic atualizada, permitindo aos profissionais configurar facilmente o Proprio Foot, ajustar as funcionalidades para cada utilizador e aceder a relatórios valiosos de atividade. Uma nova interface de utilizador melhorada permite ao utilizador verificar rapidamente a carga da bateria e a contagem de passos, como também ajustar o alinhamento do tornozelo de forma a adaptar-se aos diferentes tipos de calçado (até 5 cm de altura do calcanhar).

NOTA: A App Össur Logic está disponível para iOS (iOS 10.0 ou posterior) e conecta-se via Bluetooth. Poderá descarregá-la gratuitamente na App Store.

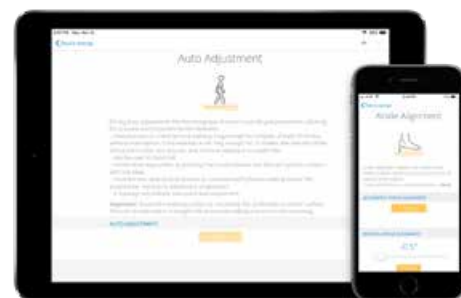

1. Comparado com a versão anterior do Proprio Foot. Dados provenientes do arquivo Össur. 1. Comparativamente a um pé de armazenamento e retorno de energia convencional. Ludviksdottir A, Gruben K, Gunnsteinsson K, Ingvarsson Th, Nicholls M. Effects on user mobility and safety when changing from a carbon fiber prosthetic foot to a bionic prosthetic foot. Apresentado no congresso Orthopädie&Reha-Technik, Leipzig, maio de 2012
3. Dados provenientes do arquivo Össur

# O NOVO PROPRIO FOOT



## INDICAÇÕES

- Amputados transtibiais e transfemorais
- Níveis de impacto: baixo a moderado
- Peso máximo do utilizador: 125Kg

## OPÇÕES

- Disponível em tamanhos 22-30, categorias 1-8
- Unity disponível nos tamanhos 25-30

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Altura de montagem: 22-24 174 mm  
25-27 180 mm  
28-30 188 mm
- Peso do dispositivo: 1,5 kg incl. funda cosmética

## OPÇÕES DO KIT

- PSX01XYZ Proprio Foot com revestimento cosmético, 2 anos de garantia
- PSXU1XYZ Proprio Foot com Unity e revestimento cosmético, 2 anos de garantia  
X: categoria 1-9, YY: tamanho do pé (22-30), Z: lado (Esquerdo/Direito) (L/R)  
• Para selecionar uma cosmética castanha, acrescente "BR" à referência.
- Entre em contato com o seu representante Össur para obter as referências das peças Unity.
- Estão disponíveis extensões de garantia adicionais até um máximo de 5 anos.

## OPÇÕES DE ACESSÓRIOS

- PRX00421 - Kit de fonte de alimentação
- FSF0SYYZ - FSF - Kit Revestimento cosmético
- FST0SYYZ - FST - Kit Revestimento cosmético

Todos os Kits Incluem: Revestimento cosmético removível com meia preta Spectra

- Estão disponíveis extensões de garantia adicionais até um máximo de 5 anos.

## GUIA DE SELEÇÃO DE CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125
Nível de Impacto Baixo	1	1	2	3	4	5	6	7
Nível de Impacto Moderado	1	2	3	4	5	6	7	8

## TABELA DE SELEÇÃO DE VARIANTES DE PRODUTO

Categoria	1	2	3	4	5	6	7	8
Tamanhos 22-24	FSF Revestimento cosmético (Unity Indisponível)					N/D		
Tamanhos 25-27	FST Revestimento cosmético (Unity Disponível)							
Tamanhos 28-30	N/D		FST Revestimento cosmético (Unity Disponível)					



Össur Iberia SLU  
c/ Caléndula, 93 - Miniparc III  
Edifício E, Despacho M18  
28109 El Soto de la Moraleja,  
Alcobendas - Madrid  
Espanha

TEL 00800 3539 3668  
FAX 00800 3539 3299  
orders.portugal@ossur.com

